


超高齢社会先進国の
転子部骨折に
多様な選択肢を

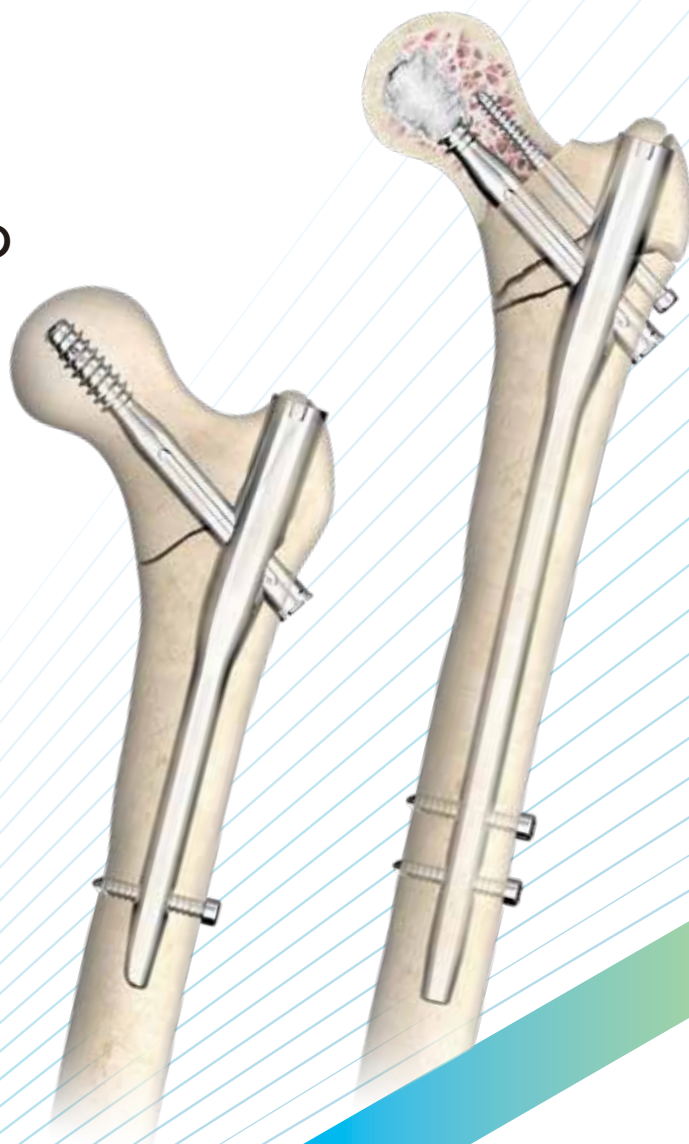

HTS UNICORN NAIL 2

HTS ユニコーンネイル2

つくりつなげる コツとカチ

HTS UNICORN NAIL 2

Multiple Options

様々な症例に対応可能

Short Nail

Middle Nail

Single Lag Screw

Double Lag Screw

UNICORN Cloud Kit

AnchorFix

Dedicated to Japanese

日本人の大腿骨髓腔への適合性を
追求したネイルデザイン

高位のベンディングポイント

ネイル挿入時のジャミングを低減し
整復位の喪失を防止

R1300 ※参考値

前弯の強い骨形状にも適合
しやすいデザイン

オブリークカット

ネイル先端内側をカットし、
スムーズな挿入を実現

ショートネイル

ミドルネイル

19.2mm

φ5.0 ARスクリュー

安全ストッパー

Simple & Intuitive

どなたにでも使いやすく 術中のストレスを低減

ツールのカラーコード化

識別を容易にしてスムーズなオペの
進行をアシスト

ターゲットデバイス


ワンデバイスで
ショートネイルとミドルネイルを
使用可能

ショートネイル用
ディスタールホール

ミドルネイル用
ディスタールホール

HTS UNICORN NAIL 2

■ Bioactive Augmentation -Osteointegration-

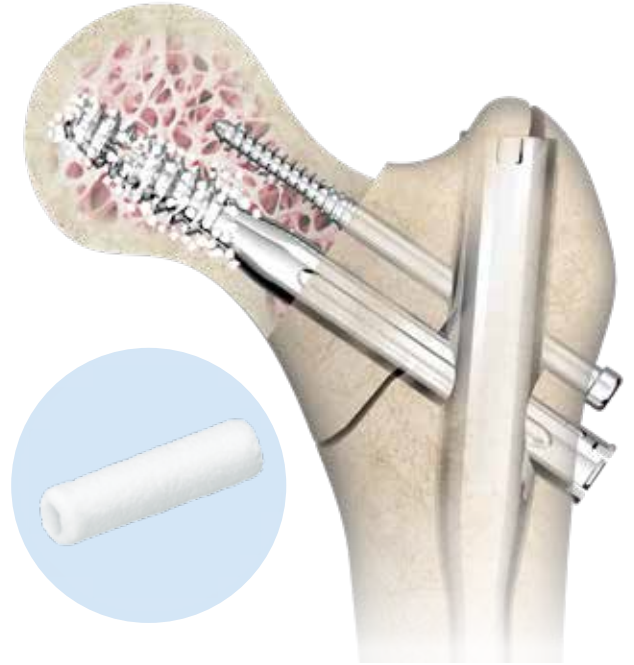


HTS UNICORN Cloud Kit

生体親和性と骨伝導性を有する
ペースト状人工骨 バイオペックス-Rが
骨と一体化します。

※裏表紙下部のQRコードから「器械説明動画」をご視聴いただけます。


▼回旋抵抗試験*1

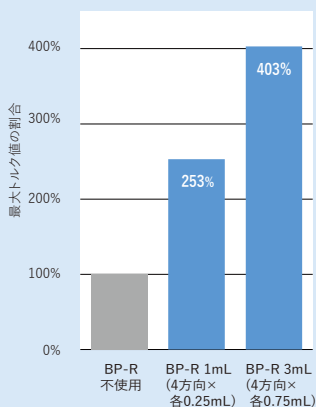

「Double ラグスクリュー BP-R不使用」を100%としたときとの比較

*1 試験方法:
模擬骨を25°回旋した際の最大トルク値を
測定

▼連続荷重試験*2

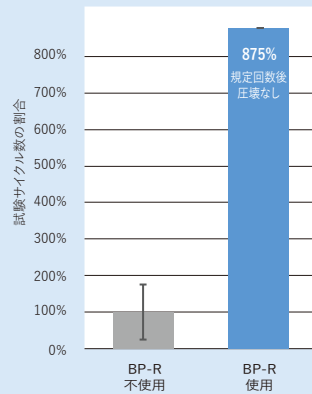

*2 試験方法:
高齢者のリハビリ期間中の全荷重歩行を想定し、
模擬骨が圧壊するまでの試験サイクル数を
測定


当社試験データ(n=3)

APACERAM AnchorFix

ハイドロキシアパタイト顆粒状人工骨を
固めた中空構造の成型体であり、
容易に補填可能です。

ラグスクリュー先端に施したセルフカッティング
がAnchorFixを粉碎します。

▼ラグスクリューの挿入により破碎し周囲に分散します。

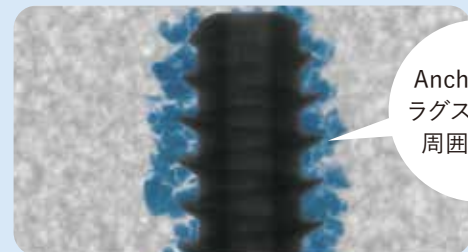

AnchorFixが
ラグスクリュー
周囲に分散


模擬骨にAnchorFixを補填しラグスクリューを挿入後に
レントゲン撮影を実施



免責事項: 本試験の結果は、必ずしも臨床成績を保證するものではありません。


HTS UNICORN NAIL 2

HTS ユニコーン2 ショートネイル

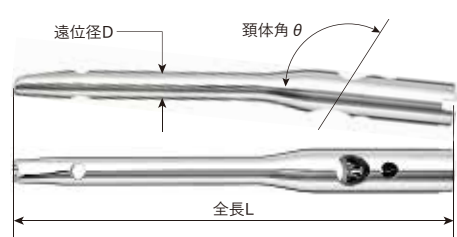


製品番号	頸体角 θ	遠位径D	全長L
ST-0631-1609	125°	φ 9mm	160mm
ST-0631-1610		φ 10mm	
ST-0631-1612		φ 12mm	
ST-0631-1614		φ 14mm	
ST-0632-1609	130°	φ 9mm	
ST-0632-1610		φ 10mm	
ST-0632-1612		φ 12mm	
ST-0632-1614		φ 14mm	

HTS ユニコーン2 ミドルネイル

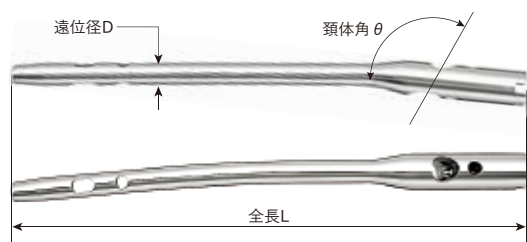

製品番号	頸体角 θ	遠位径D	全長L
ST-0631-2310R	125°	φ 10mm	230mm
ST-0631-2312R		φ 12mm	
ST-0632-2310R	130°	φ 10mm	
ST-0632-2312R		φ 12mm	
ST-0631-2310L	125°	φ 10mm	
ST-0631-2312L		φ 12mm	
ST-0632-2310L	130°	φ 10mm	
ST-0632-2312L		φ 12mm	

U2 クラウドラグスクリュー

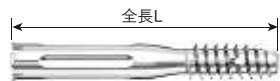


スレッド径 φ 10.3mm
スレッド長 28.0mm
シャフト径 φ 10.3mm

製品番号	全長L
ST-0613-XXX-2	70~110mm 5mm刻み

70mmはオプションになります

U2 ARスクリュー

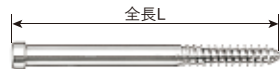


スレッド径 φ 5.0mm
スレッド長 16.5mm
シャフト径 φ 5.0mm

製品番号	全長L
ST-0633-XXX	50~100mm 5mm刻み

50mmはオプションになります

U2 ディスタールスクリュー

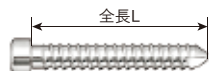

スレッド径 φ 5.0mm

製品番号	全長L
ST-0621-XXX	26~42mm 2mm刻み

U2 エンドキャップ



製品番号	タイプ	サイズ
ST-0635-000	フリー	0mm
ST-0635-005		5mm
ST-0635-010		10mm
ST-0636-2500	Lock 125°	0mm
ST-0636-2505		5mm
ST-0636-2510		10mm
ST-0636-3000	Lock 130°	0mm
ST-0636-3005		5mm
ST-0636-3010		10mm

HTS UNICORN Cloud Kit

製品番号	製品名
BPE06-1C-CL	パイオベックス-Rエクセレント HTSユニコーンクラウドセット6mL
AEK000-02	HTSユニコーンクラウドインジェクションツール-R

APACERAM AnchorFix

外径7mm 内径3.5mm 全長25mm

製品番号	製品名
R-725	AnchorFixR-725

販売名: HTS ユニコーンネイル 2
販売名: HTS ユニコーンネイル2用手術器械
販売名: パイオベックス-R

医療機器承認番号: 30500BZX00171000
医療機器届出番号: 13B1X10173206102
医療機器承認番号: 21300BZZ00274000

販売名: HTS パイオベックス注入器
販売名: アパセラム-FX

医療機器届出番号: 13B1X10173101028
医療機器承認番号: 22200BZX00814000

製造販売業者

ユニコーン, unicorn cloud, AnchorFixはHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。

HOYA Technosurgical株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4
■札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1
■仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1
■新潟営業所 〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44
■名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市中区東1-21-27
■大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9
■福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8

TEL: 03-5369-1710 FAX: 03-5369-1711
TEL: 011-241-3473 FAX: 011-241-3472
TEL: 022-371-6944 FAX: 022-371-8924
TEL: 025-288-0086 FAX: 025-281-2066
TEL: 052-955-8572 FAX: 052-955-8573
TEL: 06-6263-1679 FAX: 06-6263-1686
TEL: 092-281-6860 FAX: 092-281-6869



コーポレート
サイト



器械説明動画

⇄「HTS UNICORN Cloud kit 器械説明動画」
アクセスパスワードは弊社担当にお問い合わせ下さい。