

容態・形状に合わせたカスタムメイド頭蓋プレート



クラニオフィット-HA
CRANIOFIT/HA

クラニオフィット-PE
CRANIOFIT/PE

クラニオフィット-Ti
CRANIOFIT/Ti

クラニオフィットシリーズについて

ハイドロキシアパタイト製人工骨製品は、1985年に世界で初めて「アパセラム」として発売されました。頭蓋骨用カスタムメイド人工骨アパセラム(滅菌済み)は、人工骨-自家骨界面を化学的に強固に結合できる優れた生体親和性を有し、発売より30年、10,000症例以上の採用実績を持っています。この度、アパセラムの有する気孔構造を均一化した「クラニオフィット-HA」にリニューアルし2020年より発売、生体親和性という特性に加え、更なる強度改善が期待されます。

Ti合金製のカスタムメイドプレート「クラニオフィット」は、2015年より発売し薄くて軽いと評価いただき、クラニオフィットシリーズに伴い名称を「クラニオフィット-Ti」に変更しました。

2016年より発売しています「クラニオフィット-PE」は、衝撃に強い超軽量素材の超高分子量ポリエチレンの特性を生かし、2020年より欠損部周囲をブリムで囲ったブリムタイプが加わり、カスタムメイド人工骨の落ち込みを防止することができます。

HOYA Technosurgicalのカスタムメイド人工骨は、2020年に『クラニオフィット-HA』『クラニオフィット-Ti』『クラニオフィット-PE』として、クラニオフィットシリーズを開始いたします。

1985

APACERAM[®] アパセラム

2015

クラニオフィット
CRANIOFIT クラニオフィット

2016

クラニオフィット-HA
CRANIOFIT/PE クラニオフィット-PE

2020

クラニオフィット-HA
CRANIOFIT/HA クラニオフィット-HA
〈アパセラムより名称変更、均一構造により強度up〉



材料：ハイドロキシアパタイト
厚み：5mm
納期：5営業日～(仕様確定後)(滅菌済)

クラニオフィット-Ti
CRANIOFIT/Ti クラニオフィット-Ti
〈クラニオフィットより製品名変更〉



材料：チタン合金
厚み：0.5mm
納期：7営業日～(仕様確定後)(未菌済)

クラニオフィット-PE
CRANIOFIT/PE クラニオフィット-PE
〈欠損周囲をブリムで覆ったブリムタイプ追加〉



材料：超高分子量ポリエチレン
厚み：5mm
納期：9営業日～(仕様確定後)(滅菌済)


・各製品の正確な納期に関しては当社営業までお問い合わせください。



1 高い生体親和性と均一気孔構造


ハイドロキシアパタイト $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ は優れた生体親和性と生物学的安全性を有しています。

● 表面SEM写真 (気孔率40%)

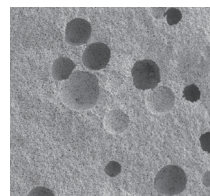

APACERAM
気孔径100~500 μm


▶▶▶
気孔構造
均一化

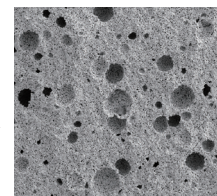

CRANIOFIT-HA
気孔径100~300 μm

● 埋植後のH.E.染色組織像

〈ウサギ頭頂骨への埋植3ヶ月〉
気孔が均一化され、新生骨がよりクラニオフィット-HAの気孔内および周囲で観察された。

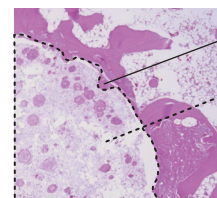


新生骨

CRANIOFIT-HA

● 強度 (耐衝撃性: JISK7211に基づく)

気孔が均一化されたことにより耐衝撃性約30%up

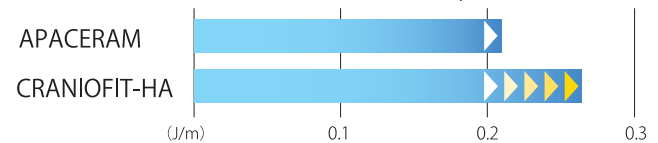

2 プレート固定可能なセラミックス人工骨

ハイドロキシアパタイト製頭蓋プレートでも専用のプレート、スクリューを用いて固定可能です。



3 術中加工が可能



専用の工具を用いて術中加工が可能のため、手術時の様々な状況に対応可能です。

納期 5営業日~
(仕様確定後) (滅菌済)

● 正確な納期に関しては
当社営業まで
お問い合わせください。

クラニオフィット-HA
CRANIOFIT-HA

超高分子量ポリエチレン 頭蓋プレート クラニオフィット-PE

滅菌済

厚さ 5 mm

インレイタイプ

ブリムタイプ



インレイタイプ

1 衝撃に強い超軽量素材

衝撃に強く術中・術後の破損リスクが低い軽量型の人工骨です。

〈素材比重〉

超高分子量
ポリエチレン
0.9


PMMA
1.2

アパタイト
3.2



アルミナ
3.9

2 材料特性を生かした様々なレイアウト

欠損部にはめ込む「インレイタイプ」

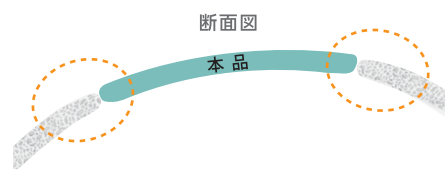



全周をサポートで覆った「ブリムタイプ」

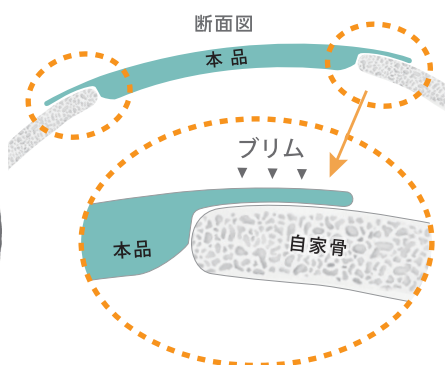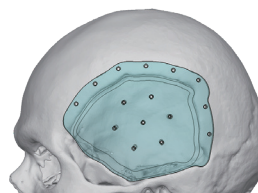

ブリムタイプ(内側)

3 専用プレート&スクリューによる ロープロファイル

- ロープロファイルのクラニオフィット頭蓋プレート固定システムのため、軟部組織への刺激をおさえ、患者様の負担を軽減することができます。
- 自家骨側と人工骨側を同一スクリューで固定可能です。
※人工骨側を固定する場合、スクリューの締めすぎに注意してください。

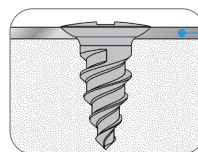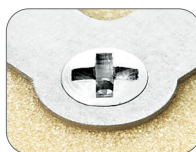

専用プレート(厚さ0.3mm)



クラニオフィット-PE
CRANIOFIT PE

納期 9営業日～
(仕様確定後)(滅菌済)

●正確な納期に関しては
当社営業まで
お問い合わせください。

Ti 合金製薄型カスタムメイドプレート クラニオフィット-Ti



オンレイタイプ




1 「薄さ」と「軽さ」に優れた 高強度チタン合金プレート

プレート厚0.5mm

ロープロファイルのため、骨へ固定した際の段差が目立たず
審美性に優れています。

軽量

同じ欠損サイズのハイドロキシアパタイト製
プレートに比べ約60%軽量化

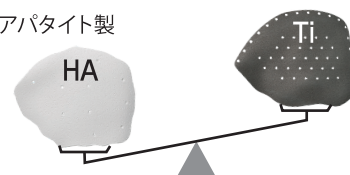

高強度


強度に優れたTi合金を使用することで、厚さ0.5mmでも
十分な強度を有します。

	厚さ	材質	3点曲げ※
クラニオフィット	0.5mm	チタン合金	31.0N
比較A	0.8mm	純チタン	30.3N
比較B	0.6mm	純チタン	12.6N

※当社データ


2 Ti合金製で国内初の3次元積層造形

電子ビーム焼結で作製された高精度の
フルカスタム製品です。

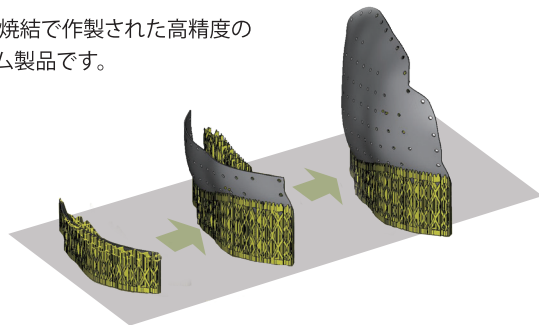

3 専用スクリューによるロープロファイル

スクリューヘッド併せて0.67mmのロープロファイル

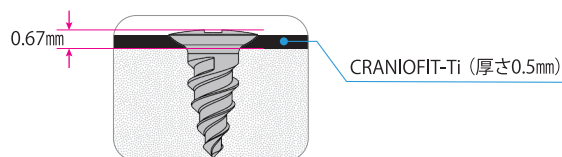

納期 7営業日～
(仕様確定後) (未滅菌)


●正確な納期に関しては
当社営業まで
お問い合わせください。

クラニオフィット-Ti
CRANIOFIT Ti


頭蓋プレートサイズ表

製品に外接する円柱の 最小の体積 ※1	サイズ ※2
150mL未満	S
150mL以上	M

※1 体積イメージ図

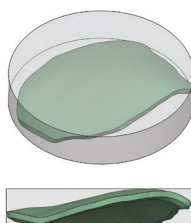

※2 サイズの目安

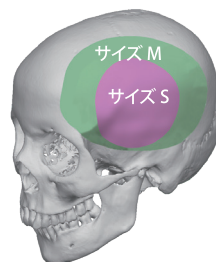

曲率によって異なります。

クラニオフィット-HA /
クラニオフィット-PE

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
再使用禁止

クラニオフィット-Ti

【禁忌・禁止】
＜適応患者＞
金属または異物に対してアレルギーのある患者には使用しないこと。〔【使用上の注意】「4. 不具合・有害事象」の項参照〕[治療の目的に対し良好な結果を得られない可能性があるため。]
＜併用医療機器＞
他種の金属製骨接合用品と組み合わせて使用しないこと。〔【使用上の注意】「3. 相互作用」の項参照〕[機器の破損、異種材料との併用による腐食が生じるおそれがあるため。]
＜使用方法＞
再使用禁止

頭蓋プレート製品一覧

医療用品4.整形用品 高度管理医療機器(クラスⅢ)


製品名	サイズ	材質	医療機器承認番号	略称
クラニオフィット-HA カスタム頭蓋骨S	S	ハイドロキシアパタイト	20100BZZ00259A01	カスタム人工骨 CP-2S
クラニオフィット-HA カスタム顎・顔面骨S				
クラニオフィット-HA カスタム頭蓋骨M	M			カスタム人工骨 CP-2M
クラニオフィット-HA カスタム顎・顔面骨M				
クラニオフィット-PE カスタム頭蓋骨S	S	超高分子量ポリエチレン	22800BZX00388000	カスタム人工骨 CP-2S
クラニオフィット-PE カスタム顎・顔面骨S				
クラニオフィット-PE カスタム頭蓋骨M	M			カスタム人工骨 CP-2M
クラニオフィット-PE カスタム顎・顔面骨M				
クラニオフィット-Ti カスタム頭蓋骨	—	チタン合金	22700BZX00291A01	カスタムプレート CQ
クラニオフィット-Ti カスタム顎・顔面骨				

頭蓋骨用プレート / スクリュー製品一覧

クラニオフィット

頭蓋プレート固定システム

医療用品4.整形用品 高度管理医療機器(クラスⅢ) 医療機器承認番号 22700BZX00292000

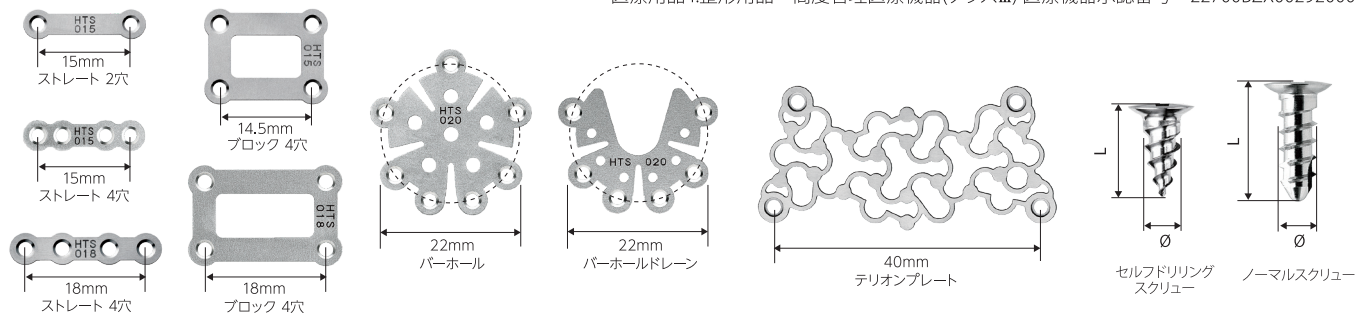

頭蓋固定用プレート 滅菌済 材質:チタン

品番	製品名	サイズ(長さ / 外径・厚み)	略称
9433-015S4	S4ストレート 4穴	長さ 15mm ・ 0.3mm	固定用内副子・F2-a-1
9463-018E4	SDブロック 4穴	長さ 18mm ・ 0.3mm	
9483-020BH	BHバーホール	外径 22mm ・ 0.3mm	固定用内副子・F2-d-1
9493-020BH	BHバーホールドレイン	外径 22mm ・ 0.3mm	
9423-015S2	S2ストレート 2穴	長さ 15mm ・ 0.3mm	固定用内副子・F2-a-1
9433-018S4	S4ストレート 4穴	長さ 18mm ・ 0.3mm	
9463-015E4	SDブロック 4穴	長さ 14.5mm ・ 0.3mm	
9183-040MA	テリオンプレート	長さ 40mm ・ 0.3mm	固定用内副子・F2-a-2

クラニオフィット
頭蓋プレート固定システム

【禁忌・禁止】
＜適応患者＞
金属または異物に対してアレルギーのある患者には使用しないこと。〔【使用上の注意】「4. 不具合・有害事象」の項参照〕[治療の目的に対し良好な結果を得られない可能性があるため。]
＜併用医療機器＞
他種の金属製骨接合用品と組み合わせて使用しないこと。〔【使用上の注意】「3. 相互作用」の項参照〕[機器の破損、異種材料との併用による腐食が生じるおそれがあるため。]
＜使用方法＞
再使用禁止

頭蓋固定用スクリュー 滅菌済 材質:チタン合金

品番	製品名	サイズ(Φ×Lmm)	種類	略称
9005-003SD	SDスクリュー Φ1.6×3.2 1本入	Φ1.6×3.2	セルフドリリングスクリュー	固定用内副子・ F1-a
9005-003SD (4P)	SDスクリュー Φ1.6×3.2 4本入	Φ1.6×3.2		
9007-003EM	EMスクリュー Φ1.8×3.2 1本入	Φ1.8×3.2	エマーゼンシースクリュー	
9011-004SDW	SDWスクリュー Φ1.6×4.0 1本入	Φ1.6×4.0	セルフドリリングスクリュー (ダブルスレッド)	
9011-004SDW (4P)	SDWスクリュー Φ1.6×4.0 4本入	Φ1.6×4.0		
9010-004EM	EMスクリュー Φ1.9×4.0 1本入	Φ1.9×4.0	エマーゼンシースクリュー	
9006-005APST ※	APSTスクリュー Φ1.6×5.0 1本入	Φ1.6×5.0	ノーマルスクリュー	
9006-005APST (4P) ※	APSTスクリュー Φ1.6×5.0 4本入	Φ1.6×5.0		
9008-005APES ※	APESスクリュー Φ1.8×5.0 1本入	Φ1.8×5.0	エマーゼンシースクリュー	

※ クラニオフィット-HAの固定に推奨

リン酸カルシウム骨ペースト

BIOPEX[®]-R Quick

クイックフルセット

バイオペックス-Rは粉剤と専用練和液からなり、

これらを用時練和して使用する、形状賦形型のリン酸カルシウム系骨補填材です。

特徴 **1** 欠損部の状況に応じて補填方法を選択可能


特徴 **2** 早期硬化型骨ペースト



粘土状・ペースト状で使えるため、補填部の形状を選ばず補填できます。

乳鉢セット

バーホール穴やテリオン部などの
大きな欠損には乳鉢セットを使い、
用手補填。

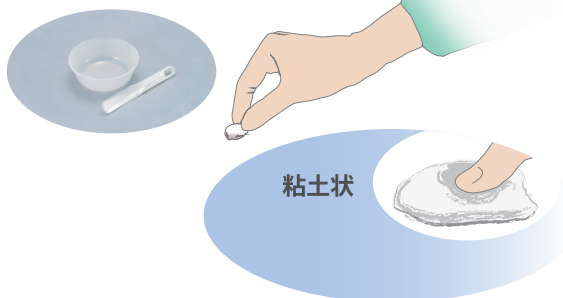

粘土状

注入セット

骨溝などの小さな欠損部の
補填には注入セットを使い、
注入器で補填。



ペースト状

医療機器承認番号
21300BZZ00274000

単回使用

医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器(クラスⅢ)

人工骨インプラント(リン酸カルシウム骨ペースト)
略称: 人工骨・AB-04

ハイドロキシアパタイト製人工骨

APACERAM[®]



特徴 **1** 生体親和性

ハイドロキシアパタイト $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$
は優れた生体親和性と生物学的安全性を
有しています。

特徴 **2** 優れた骨伝導能

骨新生に有効なマクロ気孔と気孔の連続
性を高めるミクロ気孔を有しています。

特徴 **3** 豊富なバリエーション

人体の各部位の適応症例に応じた必要な
強度と骨侵入に必要な気孔率の多彩な
バリエーションをそろえています。

バーホールボタン



C5-023



C1-023



C1-130



C1-132

キーホールボタン



C4-033

略称: 人工骨・AB-10

アパセラム-C5

医療機器承認番号

22200BZX00571000

アパセラム-C1

22200BZX00569000

アパセラム-C1

22200BZX00569000

アパセラム-C1

22200BZX00569000

アパセラム-C4

22200BZX00570000

単回使用 医療用品 4. 整形用品 高度管理医療機器(クラスⅢ) 人工骨インプラント

高精度のImplantを作製するために

製作手順

高精度のImplantの作製には3D構築が可能なThinスライス厚のデータが必要となります。

CT撮影条件

- 1 スライス厚を一定とし、間隔を開けないでください(連続データ)。
※推奨1mm以下
- 2 欠損部を全て含むように撮影してください。
欠損部が頭頂部や顎顔面など複雑な部位を含む場合、スライス幅は1mm以下が適しています。
- 3 ガントリー角度は0°で撮影してください。
OMラインに対して並行にする必要はありません。
- 4 画像再構成関数は、骨強調関数にしてください。

CT出力条件

- 5 骨(Bone)モードで出力してください。
WW、WLはメーカー差、機種差がありますので、メーカー推奨値で出力してください。
- 6 CT Raw Dataから直接画像再構築してください。
他ワークステーションなどを介すると3D構築出来ない可能性があります。

画像データの保存と情報提供

セキュリティの高いネットワークで管理します。



メディアへ保存

- 画像データを各種メディア(CD-R、DVD、USB)へ保存してください。
- ファイル形式は、DICOMで保存してください。*
- 画像データは、非圧縮形式にしてください。
- スカウトビューも可能な限りご提供ください。

※ 画像データ の保存形式により作製出来ない場合があります。ご使用のCT装置や記録メディアなど、ハードウェア環境について予め当社担当にご確認ください。

1. 頭蓋データ管理システム
(高いセキュリティで保護されます)
2. 営業担当より設計図面などの情報をお知らせいたします。

PENTAX

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社 www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本社	〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4	TEL: 03-5369-1710	FAX: 03-5369-1711
■ 札幌営業所	〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1	TEL: 011-241-3473	FAX: 011-241-3472
■ 仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1	TEL: 022-371-6944	FAX: 022-371-8924
■ 名古屋営業所	〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27	TEL: 052-955-8572	FAX: 052-955-8573
■ 大阪営業所	〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9	TEL: 06-6263-1679	FAX: 06-6263-1686
■ 福岡営業所	〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8	TEL: 092-281-6860	FAX: 092-281-6869

ご注文先

益子工場

〒321-4292 栃木県芳賀郡益子町大字塙858
TEL: 0285-72-6253 FAX: 0285-72-6259

※仕様、形状は一部変更することもあります。
※掲載の写真・形状図は実物大ではありません。
※掲載している実験数値等は参考値です。
※添付文書をよく読んでから使用してください。

