



## 掌側ロッキングプレート（フルロック）

（遠位列及び楕円ホールより近位ロッキング）




スモール

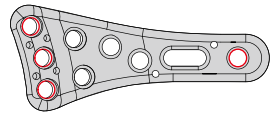

ミディアム

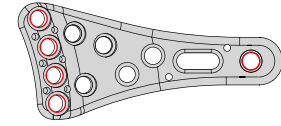

ラージ

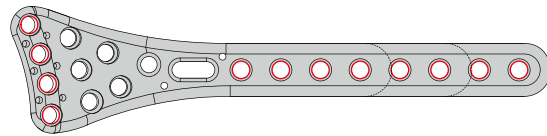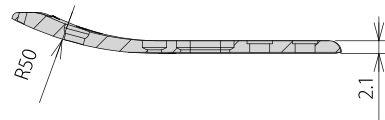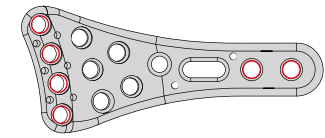

○印はロッキング可能ホールです。

\*印はオプションです

	型番		サイズ	全長	オプション
スモール 遠位幅 20mm	0113-001	右	ショート	49mm	
	0113-002		ロング	56.5mm	
	0114-001	左	ショート	49mm	
	0114-002		ロング	56.5mm	
ミディアム 遠位幅 22mm	0313-001	右	ショート	49.5mm	
	0313-002		ロング	57mm	
	0313-004		Ex.4穴	72mm	*
	0313-006		Ex.6穴	87mm	*
	0313-008	Ex.8穴	102mm	*	
	0314-001	左	ショート	49.5mm	
	0314-002		ロング	57mm	
	0314-004		Ex.4穴	72mm	*
0314-006	Ex.6穴		87mm	*	
0314-008	Ex.8穴	102mm	*		
ラージ 遠位幅 24mm	0117-002	右	ショート	57mm	
	0117-003		ロング	64.5mm	
	0118-002	左	ショート	57mm	
	0118-003		ロング	64.5mm	

材質：チタン合金

## Fit Plate System

Functional Internal fixating  
Technique Plate System



ユニテック橈骨遠位端プレートシステム

## Volar Distal Radius Plating System

Stellar

製造販売業者

HOYA Technosurgical株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711 URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

東京営業所 TEL 03-5367-8872

新潟営業所 TEL 025-288-0086

大阪営業所 TEL 06-6267-5222

福岡営業所 TEL 092-262-6320


ST100104 2016年6月

HOYA  
TECHNOSURGICAL

ユニテック橈骨遠位端プレートシステム

# Volar Distal Radius Plating System

解剖学的整復と早期可動域訓練を可能とする  
機能的で強固な内固定材料

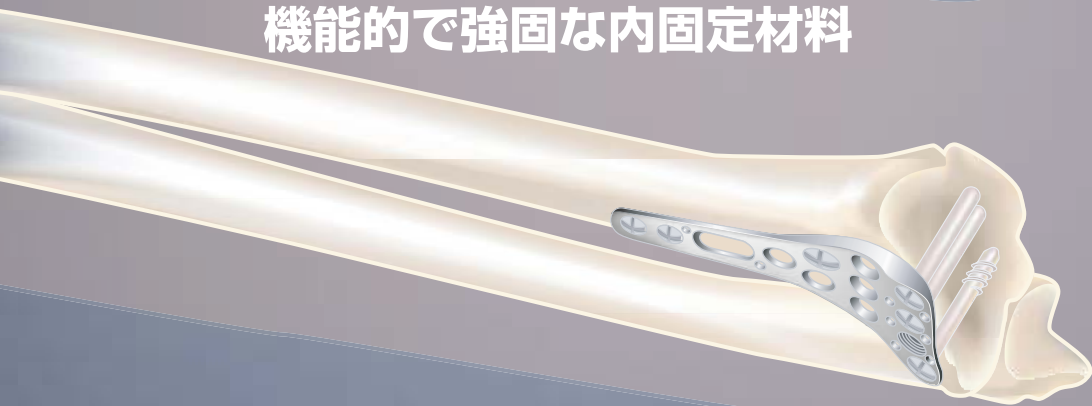

## アトミカルデザインによるMultihole設計の薄型プレートで種々の骨折型に対応できる



骨欠損や粉碎により不安定性の強い症例や粗しょう骨に対応できるロッキング機構を採用。



近位と遠位に仮固定用のK-ワイヤーホールを設けることでスクリュー刺入時のプレートのずれを防止するとともに整復位の保持が可能。


遠位にロッキングスクリューは骨軸に対し15°の傾斜を設けてあり至適位置にプレートを設置できる。



ガイドを用いることでロッキングスクリューと並行でかつ最遠位にK-ワイヤーを挿入することができ仮固定とスクリュー固定が容易に行える。




関節内骨折のReductionにコンプレッションスクリュー使用可能。

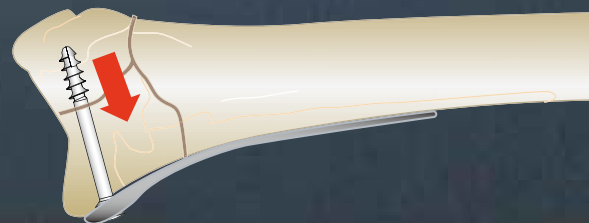

### 掌側プレート（ロッキング）

（遠位列のみロッキング）

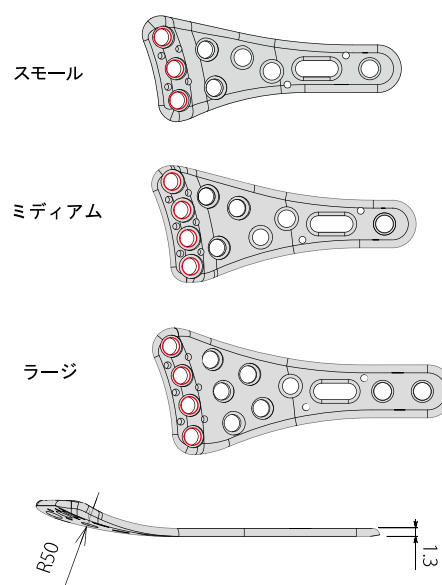



	型番		サイズ	全長
スモール	0107-001	右	ショート	49mm
	0107-002		ロング	56.5mm
遠位幅 20mm	0108-001	左	ショート	49mm
	0108-002		ロング	56.5mm
ミディアム	0309-001	右	ショート	49.5mm
	0309-002		ロング	57mm
遠位幅 22mm	0310-001	左	ショート	49.5mm
	0310-002		ロング	57mm
ラージ	0111-002	右	ショート	57mm
	0111-003		ロング	64.5mm
遠位幅 24mm	0112-002	左	ショート	57mm
	0112-003		ロング	64.5mm

○印はロッキング可能ホールです。

材質：チタン合金


### オプションプレート(ロッキングプレート)

#### フックプレート

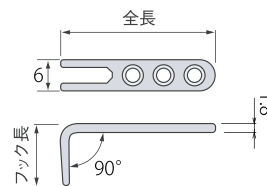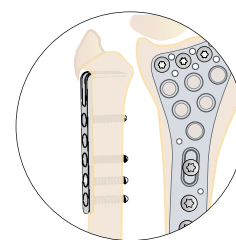


型番	名称	全長	フック長	穴数
0301-123	12mm-3穴	30mm	12mm	3
0301-124	12mm-4穴	36mm		4
0301-125	12mm-5穴	42mm		5
0301-153	15mm-3穴	30mm	15mm	3
0301-154	15mm-4穴	36mm		4
0301-155	15mm-5穴	42mm		5

#### ストレートプレート

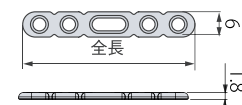


型番	名称	全長	穴数
0302-002	ストレートプレート	40mm	5
0302-004		54mm	7
0303-002	アングルプレート右	40mm	6
0303-004		54mm	8
0304-002	アングルプレート左	40mm	6
0304-004		54mm	8

#### アングルプレート

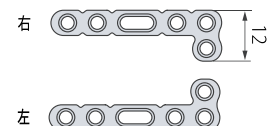


材質：チタン合金

### 遠位スクリュー

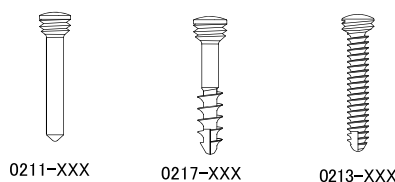

ドライバー：ヘクスローブ T10

### 近位スクリュー

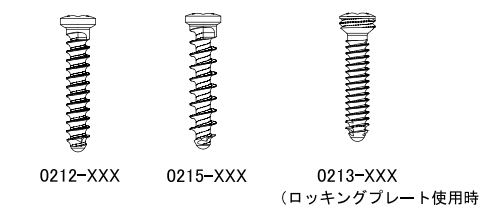

型番	名称	全長(mm)
0211-010~024	ロックピン	10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
0217-012~022	3.0mmロッキングキャンセララグスクリュー	12, 14, 16, 18, 20, 22
0213-010~022	2.6mmロッキングスクリュー	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
0212-010~022	2.6mmコーティカルスクリュー	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
0215-012~024	3.0mmキャンセララグスクリュー	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

材質：チタン合金