

Fit Plate System

Functional Internal fixating
Technique Plate System



ユニテック橈骨遠位端プレートシステム


Volar Distal Radius Plating System

Stellar

ユニテック橈骨遠位端プレートシステム

Volar Distal Radius Plating System

解剖学的整復と早期可動域訓練を可能とする
機能的で強固な内固定材料

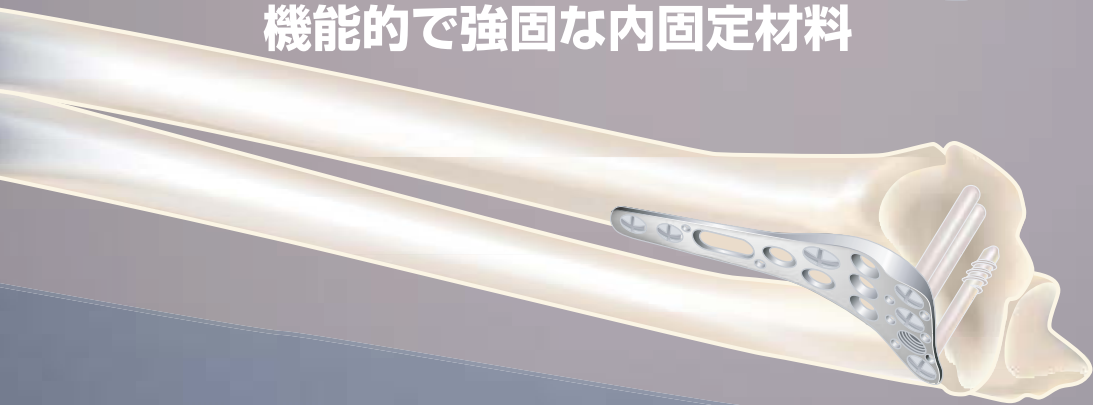

アノミカルデザインによるMultihole設計の
薄型プレートで種々の骨折型に対応できる

骨欠損や粉碎により不安定性の強い症例や
粗しょう骨に対応できるロッキング機構を採用。




ガイドを用いることでロッキングスクリュー
と並行でかつ最遠位に K- ワイヤを挿入
することができ仮固定とスクリュー固定が
容易に行える。




近位と遠位に仮固定用の
K- ワイヤホールを設けることで
スクリュー刺入時のプレートのずれを防止
するとともに整復位の保持が可能。

遠位にロッキングスクリューは骨軸に対し
15° の傾斜を設けてあり
至適位置にプレートを設置できる。

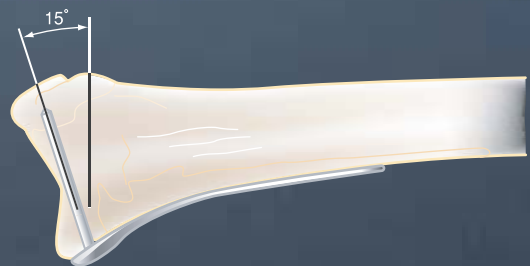


関節内骨折のReductionにコンプレッション
スクリュー使用可能。

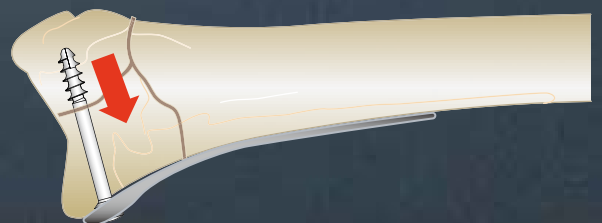


掌側プレート（ロッキング）

（遠位列のみロッキング）



スモール

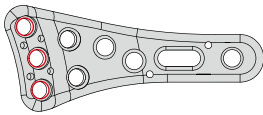

ミディアム

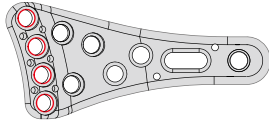

ラージ

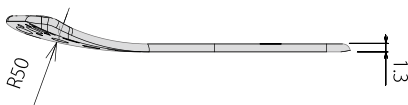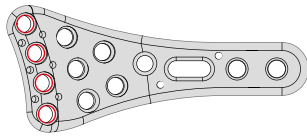



○印はロッキング可能ホールです。

材質：チタン合金

	型番		サイズ	全長
スモール 遠位幅 20mm	0107-001	右	ショート	49mm
	0107-002		ロング	56.5mm
	0108-001	左	ショート	49mm
	0108-002		ロング	56.5mm
ミディアム 遠位幅 22mm	0309-001	右	ショート	49.5mm
	0309-002		ロング	57mm
	0310-001	左	ショート	49.5mm
	0310-002		ロング	57mm
ラージ 遠位幅 24mm	0111-002	右	ショート	57mm
	0111-003		ロング	64.5mm
	0112-002	左	ショート	57mm
	0112-003		ロング	64.5mm


オプションプレート(ロッキングプレート)

フックプレート

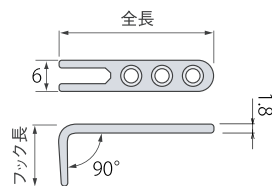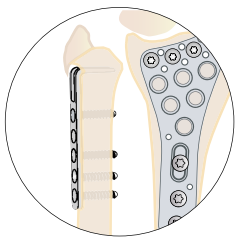


型番	名称	全長	フック長	穴数
0301-123	12mm-3穴	30mm	12mm	3
0301-124	12mm-4穴	36mm		4
0301-125	12mm-5穴	42mm	15mm	5
0301-153	15mm-3穴	30mm		3
0301-154	15mm-4穴	36mm		4
0301-155	15mm-5穴	42mm	5	

ストレートプレート

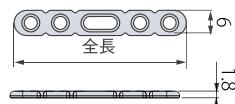

型番	名称	全長	穴数
0302-002	ストレートプレート	40mm	5
0302-004		54mm	7
0303-002	アングルプレート右	40mm	6
0303-004		54mm	8
0304-002	アングルプレート左	40mm	6
0304-004		54mm	8

アングルプレート

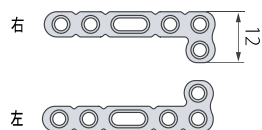

材質：チタン合金

遠位スクリュー



0211-XXX



0217-XXX



0213-XXX



ドライバー：ヘクスローブ T10

近位スクリュー



0212-XXX



0215-XXX



0213-XXX
(ロッキングプレート使用時)

型番	名称	全長(mm)
0211-010~024	ロックピン	10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24
0217-012~022	3.0mmロッキングキャンセラスラグスクリュー	12, 14, 16, 18, 20, 22
0213-010~022	2.6mmロッキングスクリュー	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
0212-010~022	2.6mmコーティカルスクリュー	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
0215-012~024	3.0mmキャンセラススクリュー	12, 14, 16, 18, 20, 22, 24


材質：チタン合金

掌側ロッキングプレート（フルロック）


（遠位列及び楕円ホールより近位ロッキング）

*印はオプションです




スモール

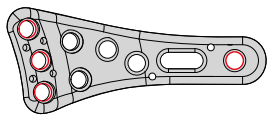

ミディアム

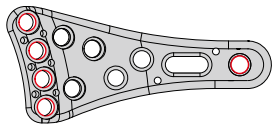

ラージ

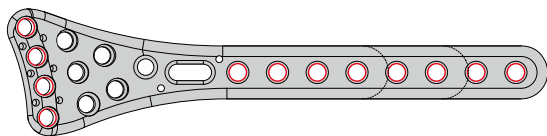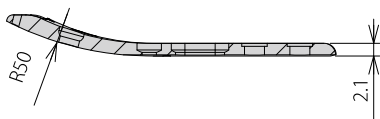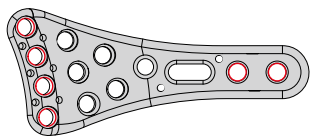

○印はロッキング可能ホールです。

材質：チタン合金

	型番		サイズ	全長	オプション
スモール 遠位幅 20mm	0113-001	右	ショート	49mm	
	0113-002		ロング	56.5mm	
	0114-001	左	ショート	49mm	
	0114-002		ロング	56.5mm	
ミディアム 遠位幅 22mm	0313-001	右	ショート	49.5mm	
	0313-002		ロング	57mm	
	0313-004		Ex.4穴	72mm	*
	0313-006		Ex.6穴	87mm	*
	0313-008	Ex.8穴	102mm	*	
	0314-001	左	ショート	49.5mm	
	0314-002		ロング	57mm	
	0314-004		Ex.4穴	72mm	*
0314-006	Ex.6穴		87mm	*	
0314-008	Ex.8穴	102mm	*		
ラージ 遠位幅 24mm	0117-002	右	ショート	57mm	
	0117-003		ロング	64.5mm	
	0118-002	左	ショート	57mm	
	0118-003		ロング	64.5mm	

製造販売業者

HOYA Technosurgical株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711 URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

東京営業所 TEL 03-5367-8872

新潟営業所 TEL 025-288-0086

大阪営業所 TEL 06-6267-5222

福岡営業所 TEL 092-262-6320