


# UNICORN NAIL


ユニコーンネイル

## ユニコーン 160mmネイル

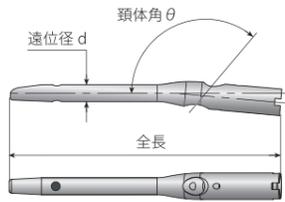

製品番号	頸体角 θ	遠位径 d	ネイル長	数量
0601-2509	125°	9mm	160mm	1
0601-2510		10mm		1
0601-2512		12mm		1
0601-2514		14mm		オプション
0601-3009	130°	9mm	160mm	1
0601-3010		10mm		1
0601-3012		12mm		1
0601-3014		14mm		オプション

## ユニコーン 230mmネイル

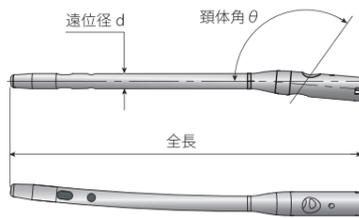

製品番号	頸体角 θ	遠位径 d	ネイル長	数量
0604-2523	125°	10mm	230mm	1
0604-2312		右		12mm
0606-3023	130°	10mm		1
0606-2312		右		12mm
0605-2523	125°	10mm	230mm	1
0605-2312		左		12mm
0607-3023	130°			10mm
0607-2312		左		12mm

## ユニコーン ラグスクリュー



スレッド径 φ10.3  
スレッド長 28.0  
シャフト径 φ10.3

製品番号	全長	数量
0610-070	70 mm	オプション
0610-XXX	75~110 mm	5mm刻み 1

## ユニコーン ディスタールスクリュー



スレッド径 φ5.0

製品番号	全長	数量
0620-0XX	26~42 mm	2mm刻み 2

## ユニコーン エンドキャップ



製品番号	サイズ	数量
0650-000	0mm	1
0650-005	+ 5mm	1
0650-010	+ 10mm	1

## ユニコーン セットスクリュー



製品番号	数量
0660-001	2

販売名: ユニコーンネイル 医療機器承認番号: 22500BZX00127000  
医療用品4. 整形用品 高度管理医療機器(クラスIII) 体内固定用大腿骨髄内釘

**【禁忌・禁止】<使用方法>再使用禁止**

- 材質: チタン合金
- 掲載の写真・形状図は実物大ではありません。
- オプション製品については弊社営業担当にお問い合わせください。
- 添付文書をよく読んでから使用してください。

UNICORN NAIL は HOYA Technosurgical 株式会社の登録商標です。

製造販売業者

**HOYA Technosurgical 株式会社** www.hoyatechnosurgical.co.jp

■本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL:03-5369-1710 FAX:03-5369-1711  
 ■札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472  
 ■仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924  
 ■新潟営業所 〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44 TEL:025-288-0086 FAX:025-281-2066  
 ■名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573  
 ■大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686  
 ■福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-262-6320 FAX:092-262-6330



**HOYA**  
TECHNOSURGICAL



# UNICORN NAIL


ユニコーンネイル

# UNICORN NAIL



## 日本人の髓腔形態を熟知したネイル

160mmネイル

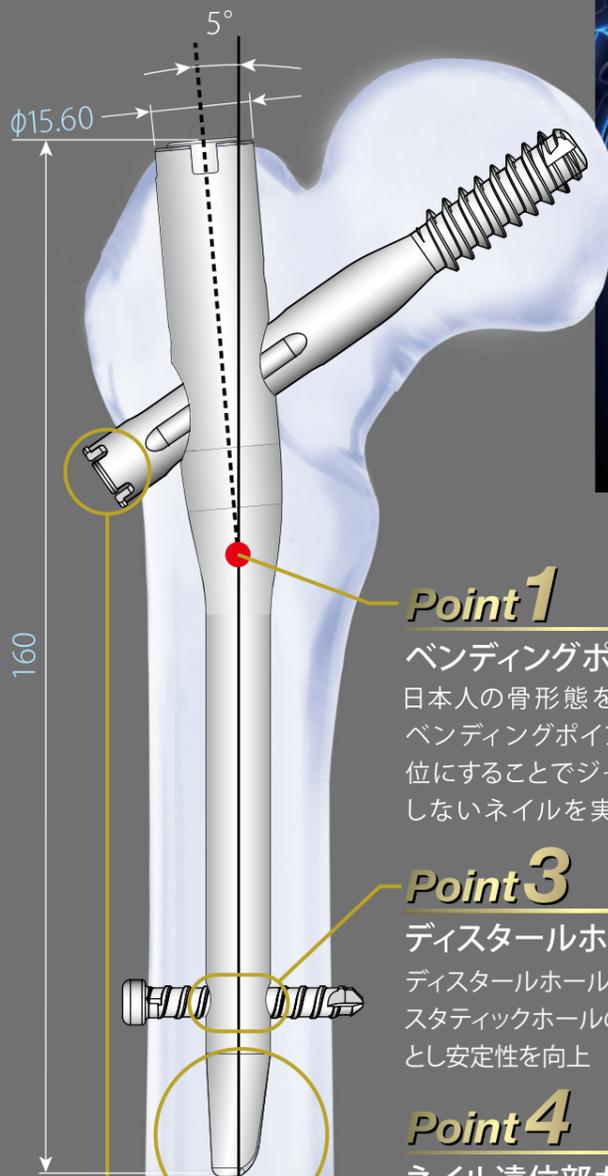

### Point 1

**ベンディングポイント**  
日本人の骨形態を考慮しベンディングポイントを近位にすることでジャミングしないネイルを実現

### Point 2

**ネイルデザイン**  
短くシェイプされた形状によりスムーズに挿入可能

### Point 3


**ディスタールホール**  
ディスタールホールはスタティックホールのみとし安定性を向上

### Point 4

**ネイル遠位部カット**  
ネイルをスムーズに挿入できるように内壁側をカット

### Point 5


**ラグスクリューの貫通防止**  
ラグスクリューのネイル貫通を防止する安全ストッパー

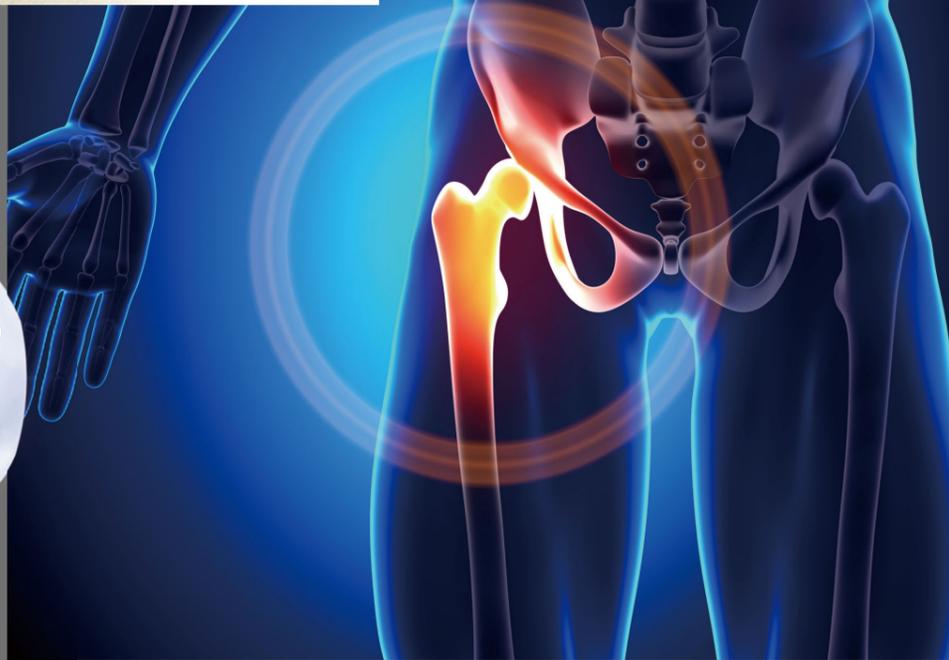

230mmネイル

### Point 6

**後壁骨折症例に対応**  
不安定性の高い後壁骨折症例に対しスイングモーションを抑制

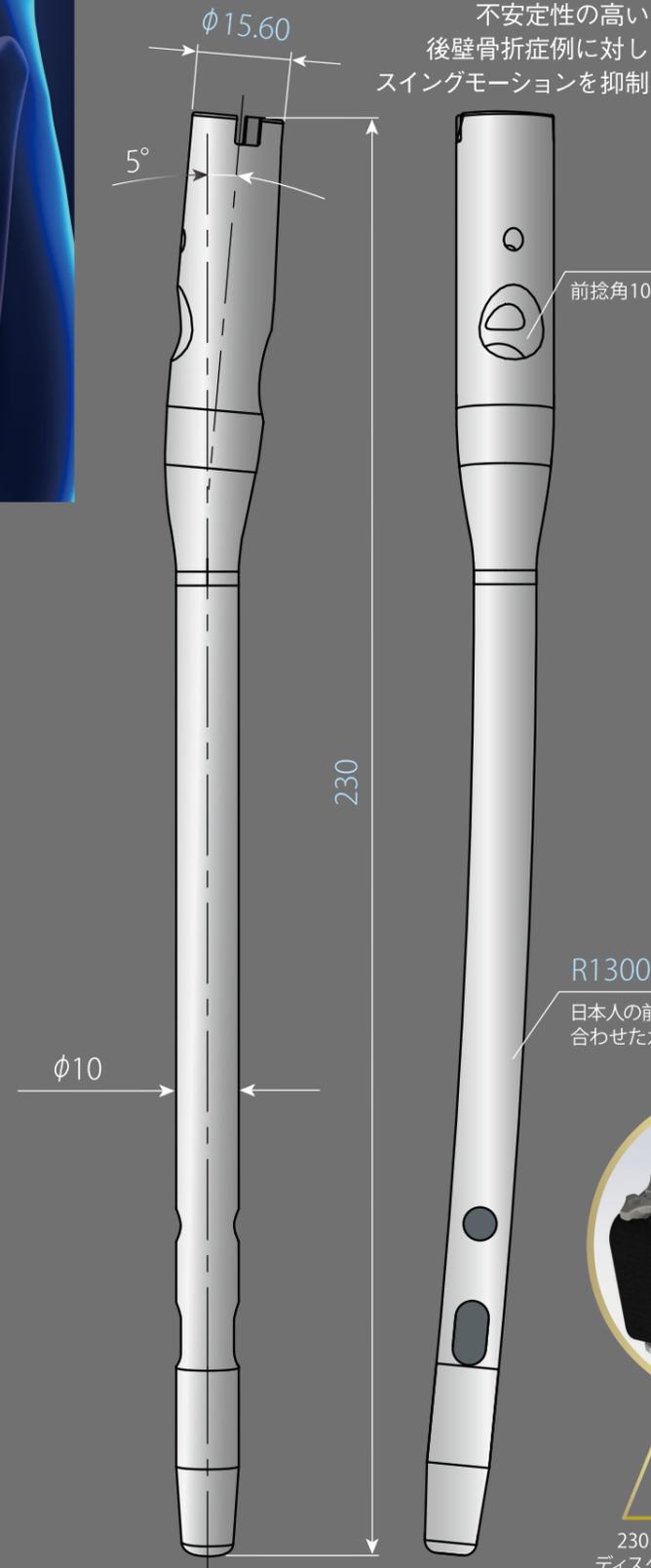

●術前・術後写真


95歳男性



87歳女性




セットスクリュー

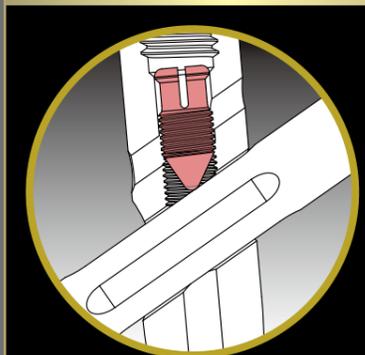

ラグスクリューのスライディングとロックを選択可能

ARピン

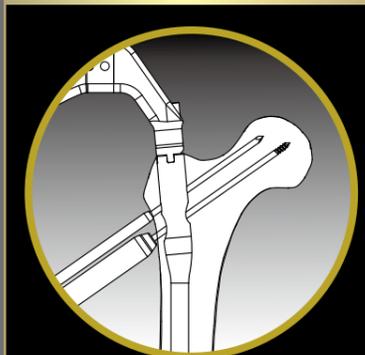

術中の骨頭回旋防止

R1300

日本人の前弯に合わせたカーブ



160mmネイル用ディスタールホール

230mmネイル用ディスタールホール

230mmデバイス



同一デバイスにて160mm・230mmネイルの横止めホールインワンが可能