

オプション

LEDライト
DRL-05T

- 独自のレンズデザインにより目に優しい均一な光が得られる
- 取り付けが簡単
- 充電不足になっても充電延長コードによりすぐに充電可能

製造販売業者：日本エー・シー・ピー株式会社
販売名：LED光源
医療機器届出番号：13B1X00168000048



PRISMVUE NF3 への取付例
プリズムビュー



PRISMVUE NF5 への取付例
プリズムビュー

双眼ルーペ 製品一覧

偏向 モデル	種類豊富 PRISMVUE NF3	タイプ		倍率	重量*	フレーム
		眼鏡レンズ付き	眼鏡レンズ無し			
偏向 モデル	コメカミバーで鼻の負担軽減 PRISMVUE NF5	○	○	X2.0 ~ X5.0	80g ~ 117g	ナイロン製 4色
		○	×	X2.5 X3.0	107g 113g	チタン製 2色
ガリレオ モデル	軽くてコンパクト USYFITVUE GP1	○	○	X2.5 X3.0	67g ~ 85g	ナイロン製 4色

*レンズ度数により変化、ストラップ別

販売名：ペンタックス PRISMVUE NF3 医療機器届出番号：13B1X10173102005
販売名：ペンタックス PRISMVUE NF5 医療機器届出番号：13B1X10173102009
販売名：ペンタックス USYFITVUE GP1 医療機器届出番号：13B1X10173102004

- 仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。

PENTAX

販売店

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社 www.hoyatechnosurgical.co.jp



- 本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL:03-5369-1710 FAX:03-5369-1711
- 札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
- 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
- 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
- 大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
- 福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

PENTAX

一般医療機器 双眼ルーペ
総合カタログ

PRISMVUE NF3
NF5



USYFITVUE GP1




偏向モデルの特徴

1 独自の光学設計

1 PENTAX独自の偏向プリズムの採用により、前方視の姿勢で術野を拡大視できます。

※A: 48度の高性能偏向プリズムを採用

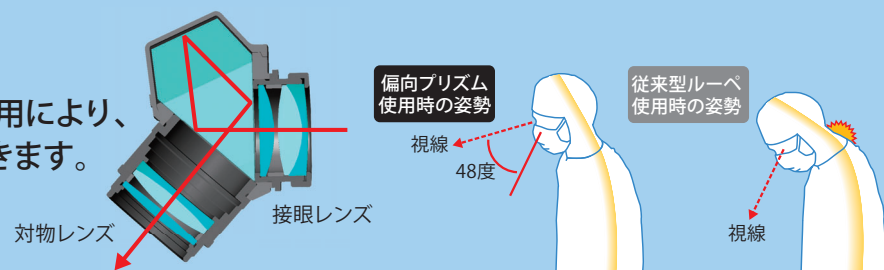

2 ニーズに対応した様々なモデルが揃っています。

Sシリーズ

高性能・
明るさ追求モデル



レンズ構成	計6枚	対物:3枚 接眼:3枚
ルーペ重量	105g	眼鏡レンズ無し 倍率3倍

Cシリーズ

高性能・
超軽量モデル



レンズ構成	計5枚	対物:2枚 接眼:3枚
ルーペ重量	80g	眼鏡レンズ無し 倍率3倍


Nシリーズ

高性能・
軽量モデル



レンズ構成	計5枚	対物:2枚 接眼:3枚
ルーペ重量	105g	眼鏡レンズ無し 倍率5倍

2 ピント調整可能

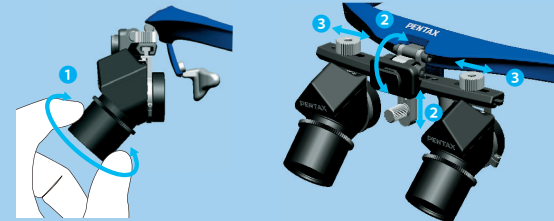


- 1 視野に合わせて、視度(ピント)の調整が可能です。
- 2 術者の好みに合わせてルーペの位置(高さ、角度)が調整できます。
- 3 術者の眼幅に合わせて、瞳孔間距離(PD)の調整が可能です。

3 拡大視と等倍視の切り替えがスムーズ

首を動かさずに、眼を上下に動かすだけで、拡大視と等倍視の切り替えが可能です。そのため、拡大視野は常に一定に保たれます。

※B: 眼鏡レンズは高屈折率1.67の非球面レンズを使用

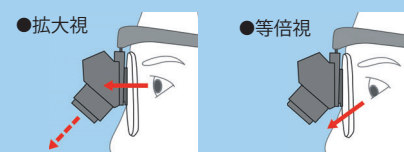


ガリレオモデルの特徴

1 軽量タイプ

レンズ構成がシンプルなため、軽量でコンパクトなルーペです。

2 ピント調整可能

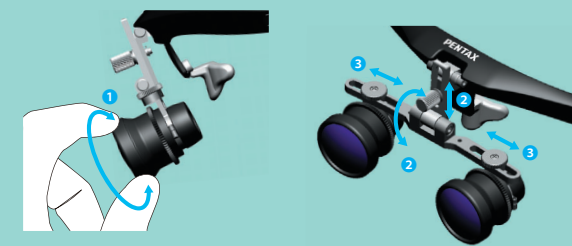

- 1 視野に合わせて、視度(ピント)の調整が可能です。
- 2 術者の好みに合わせてルーペの位置(高さ、角度)が調整できます。
- 3 術者の眼幅に合わせて、瞳孔間距離(PD)の調整が可能です。

PRISMVUE NF3 $\times 2.5$ $\times 5.0$

プリズムビュー

S・C・Nシリーズに倍率、タイプがアレンジでき、豊富なバリエーションで幅広いニーズにお答えします。

タイプL(眼鏡レンズ付き) ▶
Sシリーズ2.5倍



タイプT(眼鏡レンズ無し) ▼
Cシリーズ3.0倍



鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

	タイプL(眼鏡レンズ付き)					タイプT(眼鏡レンズ無し)						
	Sシリーズ		Cシリーズ			Nシリーズ		Sシリーズ		Cシリーズ		
倍率 ^{※1}	$\times 2.5$	$\times 3.0$	$\times 3.0$	$\times 3.5$	$\times 4.0$	$\times 5.0$	$\times 2.5$	$\times 3.0$	$\times 3.0$	$\times 3.5$	$\times 4.0$	$\times 5.0$
射出瞳径	6.4mm		4.9mm	4.6mm	4.3mm	4.2mm	6.4mm		4.9mm	4.6mm	4.3mm	4.2mm
重量 ^{※2}	107g	116g	92g	94g	98g	117g	96g	105g	80g	82g	86g	105g
作業距離(WD)	オーダーメイド(35cm~70cm)											
フレームカラー ^{※3}	R:レッド B:ブルー K:ブラック S:シルバー											

※1. 倍率は、 $\times 2.0$ も対応可能 ※2. レンズ度数により変化、ストラップ別 ※3. フレーム: ナイロン製



PRISMVUE NF5 $\times 2.5$ $\times 3.0$

プリズムビュー

コメカミバー(前モダン)による、安定感のある掛け心地です。

鼻の負担を軽減します。(当社従来品比)
詳細については、営業担当者にご相談ください。
技術協力: 株式会社シャルマン



Sシリーズ2.5倍

	Sシリーズ	
倍率	$\times 2.5$	$\times 3.0$
射出瞳径	6.4mm	
重量 ^{※1}	107g	113g
作業距離(WD)	オーダーメイド(35cm~70cm)	
フレームカラー ^{※2}	LB: ライトブラウン DG: ダークグレー	

※1. レンズ度数により変化、ストラップ別 ※2. フレーム: チタン製



USYFITVUE GP1 $\times 2.5$ $\times 3.0$

ユーザーフィットビュー

軽量で、柔軟なルーペ位置の調整が可能です。

タイプL(眼鏡レンズ付き) ▶
2.5倍



タイプT(眼鏡レンズ無し) ▼
3.0倍



鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

	タイプL(眼鏡レンズ付き)		タイプT(眼鏡レンズ無し)	
	$\times 2.5$	$\times 3.0$	$\times 2.5$	$\times 3.0$
倍率	$\times 2.5$	$\times 3.0$	$\times 2.5$	$\times 3.0$
重量 ^{※1}	78g	85g	67g	74g
作業距離(WD)	35cm, 40cm, 45cm, 50cm			
フレームカラー ^{※2}	R:レッド B:ブルー K:ブラック S:シルバー			

※1. レンズ度数により変化、ストラップ別 ※2. フレーム: ナイロン製

