




Narrow タイプ Saty

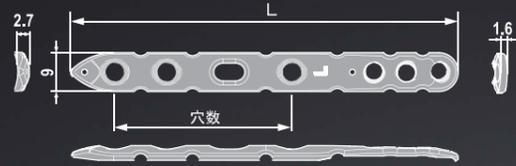

Wide タイプ Suzy

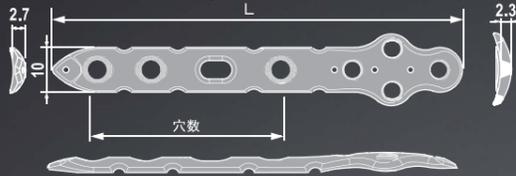


3.5 プロキシマルFIXスクリュー

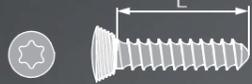


3.5 コーティカルスクリュー



3.5 ディスターールFIXスクリュー

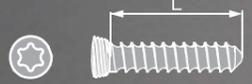

4.0キャンセラススクリュー

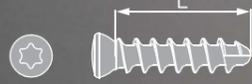

●プレート

製品番号		製品名	穴数	全長(L)	オプション
0471-003	Narrow タイプ	SATY FIX タイプ 右	3	77.5mm	
0471-004		SATY FIX タイプ 右	4	89.5mm	
0471-006		SATY FIX タイプ 右	6	113.5mm	
0471-008		SATY FIX タイプ 右	8	137.5mm	*
0472-003		SATY FIX タイプ 左	3	77.5mm	
0472-004		SATY FIX タイプ 左	4	89.5mm	
0472-006		SATY FIX タイプ 左	6	113.5mm	
0472-008		SATY FIX タイプ 左	8	137.5mm	*
0475-003	Wide タイプ	SUZY FIX タイプ	3	79.6mm	
0475-004		SUZY FIX タイプ	4	91.6mm	
0475-006		SUZY FIX タイプ	6	115.6mm	
0475-008		SUZY FIX タイプ	8	139.6mm	*

●スクリュー

製品番号		製品名	全長(L)	
0433-010	近位	3.5 プロキシマルFIXスクリュー	10mm	
0433-011		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	11mm	
0433-012		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	12mm	
0433-013		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	13mm	
0433-014		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	14mm	
0433-015		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	15mm	
0433-016		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	16mm	
0433-018		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	18mm	
0433-020		3.5 プロキシマルFIXスクリュー	20mm	
0401-010		3.5 コーティカルスクリュー	10mm	
0401-011		3.5 コーティカルスクリュー	11mm	
0401-012		3.5 コーティカルスクリュー	12mm	
0401-013		3.5 コーティカルスクリュー	13mm	
0401-014		3.5 コーティカルスクリュー	14mm	
0401-015		3.5 コーティカルスクリュー	15mm	
0401-016		3.5 コーティカルスクリュー	16mm	
0401-018		3.5 コーティカルスクリュー	18mm	
0401-020		3.5 コーティカルスクリュー	20mm	
0401-022		3.5 コーティカルスクリュー	22mm	
0401-024		3.5 コーティカルスクリュー	24mm	
0401-026	3.5 コーティカルスクリュー	26mm		
0401-028	3.5 コーティカルスクリュー	28mm		
0401-030	3.5 コーティカルスクリュー	30mm		
0401-032	3.5 コーティカルスクリュー	32mm	*	
0401-034	3.5 コーティカルスクリュー	34mm	*	
0401-036	3.5 コーティカルスクリュー	36mm	*	
0401-038	3.5 コーティカルスクリュー	38mm	*	
0401-040	3.5 コーティカルスクリュー	40mm	*	
0411-006	遠位	3.5 ディスターールFIXスクリュー	6mm	
0411-008		3.5 ディスターールFIXスクリュー	8mm	
0411-010		3.5 ディスターールFIXスクリュー	10mm	
0411-011		3.5 ディスターールFIXスクリュー	11mm	
0411-012		3.5 ディスターールFIXスクリュー	12mm	
0411-013		3.5 ディスターールFIXスクリュー	13mm	
0411-014		3.5 ディスターールFIXスクリュー	14mm	
0411-015		3.5 ディスターールFIXスクリュー	15mm	
0411-016		3.5 ディスターールFIXスクリュー	16mm	
0411-018		3.5 ディスターールFIXスクリュー	18mm	
0411-020		3.5 ディスターールFIXスクリュー	20mm	
0402-006		4.0 キャンセラススクリュー	6mm	
0402-008		4.0 キャンセラススクリュー	8mm	
0402-010		4.0 キャンセラススクリュー	10mm	
0402-012		4.0 キャンセラススクリュー	12mm	
0402-014		4.0 キャンセラススクリュー	14mm	
0402-016	4.0 キャンセラススクリュー	16mm		
0402-018	4.0 キャンセラススクリュー	18mm		
0402-020	4.0 キャンセラススクリュー	20mm		

材質：チタン合金



ユニテック下腿骨用プレートシステム

Fibula

製造販売業者

HOYA Technosurgical 株式会社

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-28-4

TEL 03-5369-1710 FAX 03-5369-1711 URL www.hoyatechnosurgical.co.jp

東京営業所 TEL 03-5367-8872

新潟営業所 TEL 025-288-0086

大阪営業所 TEL 06-6267-5222

福岡営業所 TEL 092-262-6320

FI100105 2016年6月


Simple and Multi functional

Fibula

Distal Fibula Plating System
ユニテック下腿骨用プレートシステム

腓骨遠位端骨折に対し強固な固定を実現します

Narrowタイプ Saty

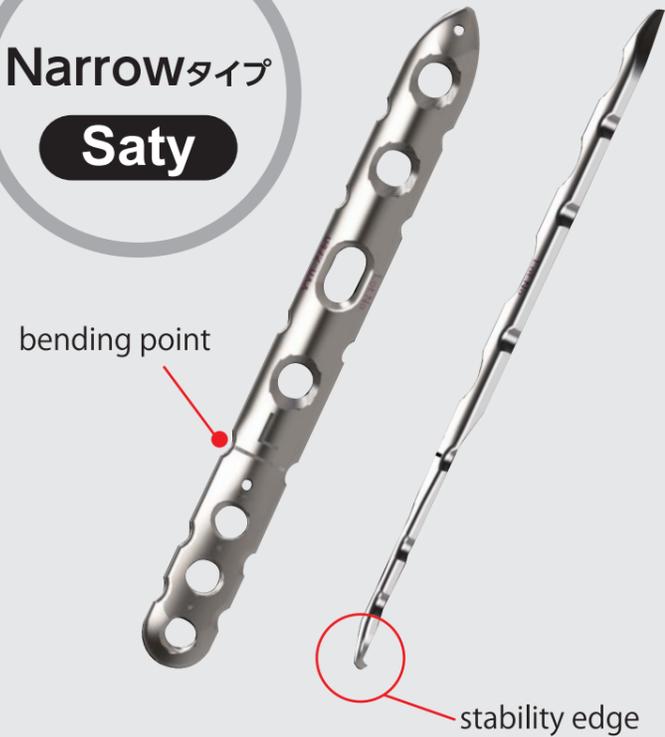

- ・ストレート形状で設置位置に自由度を確保し、外側、後外側設置可能
- ・遠位スクリューはクロスロッキングで引き抜き強度を確保
- ・stability edgeによって、より遠位への設置可能



Wideタイプ Suzy




- ・プレート遠位のクローバー形状で強固な回旋抵抗を確保
- ・プレート遠位部も縫合しやすいテーパード形状
- ・遠位スクリューはホールドロッキングにより、回旋、引き抜きに対し強固な抵抗力をもつ



Rigid Fixation

日本人の3D-CTデータを解析、アノミカル形状を再現

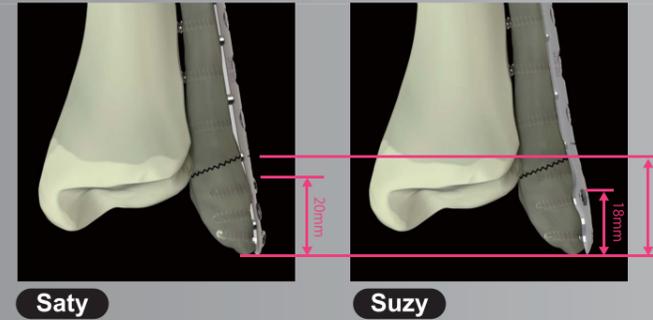


- Saty プレート
プレート遠位端より20mm 以内に3本のスクリューで固定可能
- Suzy プレート
プレート遠位端より28mm 以内に4本、18mm 以内に3本のスクリューで固定可能



Saty

3本のスクリューはそれぞれ前・後方へクロスロッキングし、優れた引き抜き強度を実現

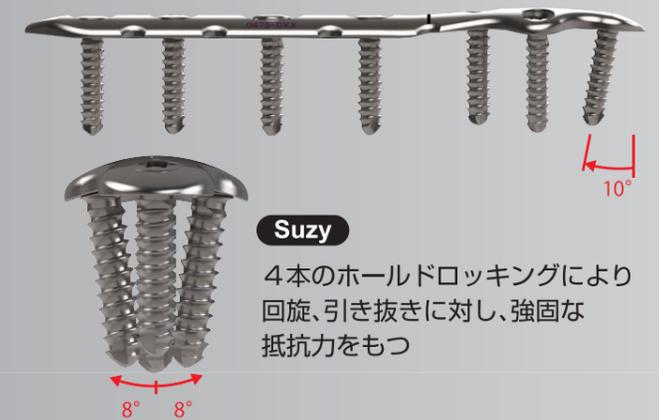

Suzy

4本のホールドロッキングにより回旋、引き抜きに対し、強固な抵抗力をもつ

Screw Variation

スクリューは遠位・近位ともにロッキングとノンロッキングを選択可能

近位スクリュー



遠位スクリュー



FIXスクリュー(ロッキングスクリュー)のテーパードロッキング機構
テーパードロッキング機構 : スクリューがセンタリングされ、挿入角度のずれやネジのかじりこみのリスクを軽減
二条ネジを採用 : ネジの嵌合する長さを保ったまま少ない回転数で容易に固定



スクリューヘッドは全てのスクリュー共通のヘクスローブタイプ(T15)を採用
動力伝達効率が高く、カムアウト現象を防止