



HTS UNICORN Y Blade

HTS ユニコーンYブレード


シンプルな手技で追加の固定力を獲得可能

3枚のブレードがノンリーミングエリアに噛みこむアンカリング効果


ハンマリングによるシンプルな操作

素早い設置が可能

▼回旋抵抗※1

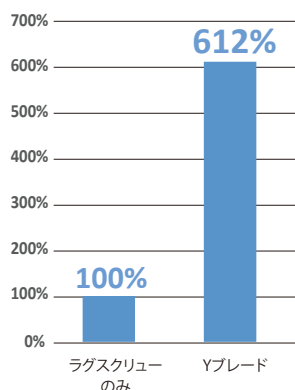

▼内反抵抗※2

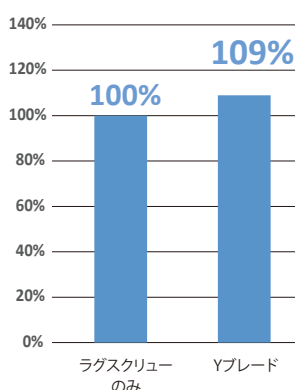

当社試験データ (n=3)

※1 試験方法: 模擬骨が破壊するまでねじ込みトルクを負荷

模 擬 骨: 海綿骨セル型ブロック7.5pcf

※2 試験方法: 模擬骨が破壊するまで静荷重を負荷

模 擬 骨: 海綿骨セル型ブロック7.5pcf

免責事項: 本試験の結果は、必ずしも臨床成績を保証するものではありません。

「従来のラグスクリュー」を100%としたときの比較



三田市民病院 岩倉崇先生より画像提供

インプラント

以下の3点を組み合わせて使用します。

Yブレード ラグスクリュー



Yブレード



Yブレード ロックスクリュー



製品番号

製品名 / 全長※3

数量

ST-0680-XXX

Yブレード ラグスクリュー 75~100mm 5mm刻み

1

材質: チタン合金

※3 Yブレード ラグスクリュー、YブレードとYブレード ロックスクリューを組み立てたときの長さ

販売名: ユニコーンネイル(滅菌済)
販売名: ユニコーンネイル用手術器械

医療機器承認番号: 227008ZX00280000
医療機器届出番号: 13B1X10173206101

一般的名称: 体内固定用大腿骨髄内釘
一般的名称: 骨手術用器械

高度管理医療機器(クラスⅢ)
一般医療機器(クラスⅠ)

製造販売業者

HOYA Technosurgical株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本 社	〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4	TEL: 03-5369-1710	FAX: 03-5369-1711
■ 札幌営業所	〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1	TEL: 011-241-3473	FAX: 011-241-3472
■ 仙台営業所	〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1	TEL: 022-371-6944	FAX: 022-371-8924
■ 新潟営業所	〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44	TEL: 025-288-0086	FAX: 025-281-2066
■ 名古屋営業所	〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27	TEL: 052-955-8572	FAX: 052-955-8573
■ 大阪営業所	〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9	TEL: 06-6263-1679	FAX: 06-6263-1686
■ 福岡営業所	〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8	TEL: 092-262-6320	FAX: 092-262-6330



ユニコーン、YブレードはHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 掲載の写真・形状図は実物大ではありません。
- 掲載している実験数値等は参考値です。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。