

近位設置型プレート

HTS Stellar P

スモール

ミディアム

ラージ


※ プレートのイラスト例は右用です。

プレート 左

製品番号		サイズ	
2210-001	スモール 遠位幅	20mm	ショート 全長 49.5mm
2210-002			ロング 全長 57.0mm
2212-001	ミディアム 遠位幅	22mm	ショート 全長 49.5mm
2212-002			ロング 全長 57.0mm
2214-001	ラージ 遠位幅	24mm	ショート 全長 49.5mm
2214-002			ロング 全長 57.0mm

プレート 右

製品番号		サイズ	
2211-001	スモール 遠位幅	20mm	ショート 全長 49.5mm
2211-002			ロング 全長 57.0mm
2213-001	ミディアム 遠位幅	22mm	ショート 全長 49.5mm
2213-002			ロング 全長 57.0mm
2215-001	ラージ 遠位幅	24mm	ショート 全長 49.5mm
2215-002			ロング 全長 57.0mm

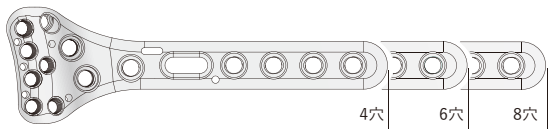

Ex. ロングプレート 左 オプション

2212-004	ミディアム 遠位幅	22mm	Ex. 4穴	全長 72.0mm
2212-006			Ex. 6穴	全長 87.0mm
2212-008			Ex. 8穴	全長 102.0mm

Ex. ロングプレート 右 オプション

2213-004	ミディアム 遠位幅	22mm	Ex. 4穴	全長 72.0mm
2213-006			Ex. 6穴	全長 87.0mm
2213-008			Ex. 8穴	全長 102.0mm

スクリュー

製品番号		長さ サイズ (mm)	
2410-010 ～ 2410-024	2.2 ロッキングピン	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	
2411-010 ～ 2411-024	2.4 ロッキング キャンセラスクリュー	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	遠位用 T8
2412-014 ～ 2412-024	2.4 ロッキング キャンセラスラグスクリュー	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	
2413-010 ～ 2413-020	2.6 コーティカルスクリュー	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	近位用 T10
2414-010 ～ 2414-018	2.6 ロッキング コーティカルスクリュー	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	

【禁忌・禁止】<使用方法>再使用禁止

販売名: HTS ステラプレートシステム 医療機器承認番号:30200BZX00182000

HTS StellarはHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 添付文書をよく読んでから使用してください。

HOYA Technosurgical 株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL:03-5369-1710 FAX:03-5369-1711
■ 札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
■ 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
■ 新潟営業所 〒950-0971 新潟市中央区近江2-20-44 TEL:025-288-0086 FAX:025-281-2066
■ 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市中区東1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
■ 大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
■ 福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-262-6320 FAX:092-262-6330



HSP100103

HOYA
TECHNOSURGICAL

近位設置型プレート



HTS Stellar P

HTS ステラプレートシステム

つくりつなげる コツとカチ

近位設置型プレート

HTS Stellar P

簡便性を重視した
モノアキシャル
ロック機構

ドリルガイドとK-wireスリーブを
挿入可能なガイドブロック



スクリューの
刺入方向ガイドと
軟部組織のレトラクトを
兼ねたガイドブロック



日本人向けの
サイズラインナップ

小柄な患者様でも7本のスクリューで
強固な固定を実現します。
(スモールサイズ 遠位幅20mm)



周辺組織へ配慮した
ロープロファイルデザイン

Cross Locking Mechanism
による強固な関節面支持

橈骨傾斜に沿うように隙間なく配列された2列のスクリューは
ただ一つとして平行となるものではありません。
関節外骨折では骨片の保持性が向上され、
関節内骨折においては関節面の強固な支持を実現します。



Cross Locking Mechanism

近位設置型/遠位設置型プレートのラインナップにより症例に応じた使い分けが可能

近位設置型プレート

HTS Stellar P



遠位設置型プレート

HTS Stellar D



RIMプレート

HTS Stellar R



すべてのロックングスクリューに
テーパー2条ねじを採用し操作性を向上

シリーズ約7万例の実績を基に洗練・進化させた
近位設置型プレートシステム