

PENTAX

一般医療機器 双眼ルーペ
総合カタログ

PRISM[◇]VUE NF3 NF5



USYFITVUE GP1




偏向モデルの特徴

独自の光学設計

- 1 PENTAX独自の偏向プリズムの採用により、
前方視の姿勢で術野を拡大視できます。

※A: 48度の高性能偏向プリズムを採用

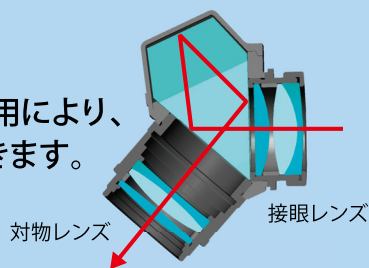

偏向プリズム
使用時の姿勢

視線

48度

従来型ルーペ
使用時の姿勢

視線

- 2 ニーズに対応した様々なモデルが揃っています。

Sシリーズ

高性能・
明るさ追求モデル



Cシリーズ

高性能・
超軽量モデル



Nシリーズ

高性能・
軽量モデル



レンズ構成	計6枚	対物:3枚 接眼:3枚
ルーペ重量	105g	眼鏡レンズ無し 倍率3倍

レンズ構成	計5枚	対物:2枚 接眼:3枚
ルーペ重量	80g	眼鏡レンズ無し 倍率3倍

レンズ構成	計5枚	対物:2枚 接眼:3枚
ルーペ重量	105g	眼鏡レンズ無し 倍率5倍

PRISMVIEW NF3 $\times 2.5$ $\times 3.0$ $\times 5.0$

プリズムビュー

S・C・Nシリーズに倍率、タイプがアレンジでき、
豊富なバリエーションで
幅広いニーズにお答えします。

タイプL(眼鏡レンズ付き)▶
Sシリーズ2.5倍



タイプT(眼鏡レンズ無し)▼
Cシリーズ3.0倍



鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

	タイプL(眼鏡レンズ付き)						タイプT(眼鏡レンズ無し)					
	Sシリーズ		Cシリーズ		Nシリーズ		Sシリーズ		Cシリーズ		Nシリーズ	
倍率※1	×2.5	×3.0	×3.0	×3.5	×4.0	×5.0	×2.5	×3.0	×3.0	×3.5	×4.0	×5.0
射出瞳径	6.4mm		4.9mm	4.6mm	4.3mm	4.2mm	6.4mm		4.9mm	4.6mm	4.3mm	4.2mm
重量※2	107g	116g	92g	94g	98g	117g	96g	105g	80g	82g	86g	105g
作業距離(WD)	オーダーメイド (35cm~70cm)											
フレームカラー※3	R:レッド B:ブルー K:ブラック S:シルバー											

※1. 倍率は、×2.0も対応可能

※2. レンズ度数により変化、ストラップ別

※3. フレーム: ナイロン製

フレームカラー



レッド



ブルー




ブラック



シルバー

ピント調整可能

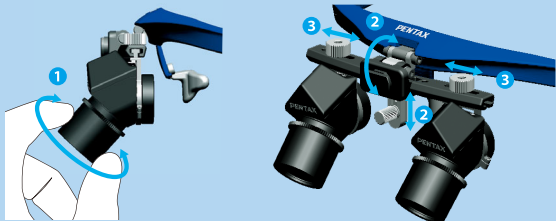


- ①視野に合わせて、視度(ピント)の調整が可能です。
- ②術者の好みに合わせてルーペの位置(高さ、角度)が調整できます。
- ③術者の眼幅に合わせて、瞳孔間距離(PD)の調整が可能です。

拡大視と等倍視の切り替えがスムーズ

※B
首を動かさずに、眼を上下に動かすだけで、拡大視と等倍視の切り替えが可能です。そのため、拡大視野は常に一定に保たれます。

※B: 眼鏡レンズは高屈折率1.67の非球面レンズを使用

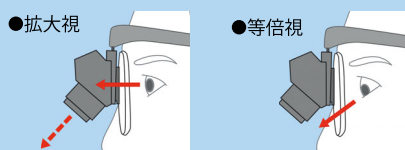


ガリレオモデルの特徴

軽量タイプ

レンズ構成がシンプルなため、軽量でコンパクトなルーペです。

ピント調整可能

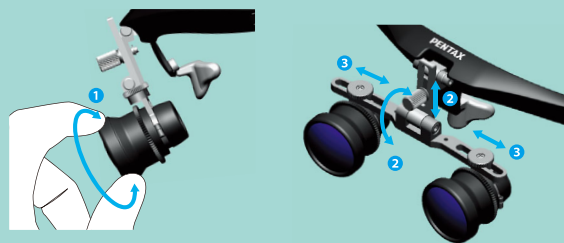

- ①視野に合わせて、視度(ピント)の調整が可能です。
- ②術者の好みに合わせてルーペの位置(高さ、角度)が調整できます。
- ③術者の眼幅に合わせて、瞳孔間距離(PD)の調整が可能です。

PRISMVUE NF5 ×2.5 ×3.0

プリズムビュー

コメカミバー(前モダン)による、安定感のある掛け心地です。

鼻の負担を軽減します。(当社従来品比)

詳細については、営業担当者にご相談ください。
技術協力: 株式会社シャルマン



Sシリーズ2.5倍

	Sシリーズ	
倍率	×2.5	×3.0
射出瞳径	6.4mm	
重量※1	107g	113g
作業距離(WD)	オーダーメイド (35cm~70cm)	
フレームカラー※2	LB:ライトブラウン	DG:ダークグレー

※1. レンズ度数により変化、ストラップ別

※2. フレーム: チタン製

フレームカラー



USYFITVUE GP1 ×2.5 ×3.0

ユージーフィットビュー

軽量で、柔軟なルーペ位置の調整が可能です。

タイプL
(眼鏡レンズ付き) ▶
2.5倍

タイプT
(眼鏡レンズ無し) ▼
3.0倍



鼻パッド付け替え(タイプTのみ)



眼鏡併用の有無に合わせて、鼻パッドを変更できます。

	タイプL(眼鏡レンズ付き)		タイプT(眼鏡レンズ無し)	
倍率	×2.5	×3.0	×2.5	×3.0
重量※1	78g	85g	67g	74g
作業距離(WD)	35cm、40cm、45cm、50cm			
フレームカラー※2	R:レッド	B:ブルー	K:ブラック	S:シルバー

※1. レンズ度数により変化、ストラップ別

※2. フレーム: ナイロン製

フレームカラー



LEDライト

DRL-05RT

- 独自のレンズデザインにより目に優しい均一な光が得られる
- 取り付けが簡単
- 充電不足になっても充電延長コードによりすぐにチャージ可能



製造販売業者：日本エー・シー・ピー株式会社
販売名：LED 光源
医療機器届出番号：13B1X0016800048

PRISMVUE NF3 への取付例
プリズムビュー



PRISMVUE NF5 への取付例
プリズムビュー

双眼ルーペ 製品一覧

		タイプ		倍率	重量*	フレーム
		眼鏡レンズ付き	眼鏡レンズ無し			
偏向 モデル	種類豊富 PRISMVUE NF3	○	○	X2.0 ~ X5.0	80g ~ 117g	ナイロン製 4色
	コメカミバーで鼻の負担軽減 PRISMVUE NF5	○	×	X2.5 X3.0	107g 113g	チタン製 2色
ガリレオ モデル	軽くてコンパクト USYFITVUE GP1	○	○	X2.5 X3.0	67g ~ 85g	ナイロン製 4色

* レンズ度数により変化、ストラップ別

販売名：ペンタックス PRISMVUE NF3 医療機器届出番号：13B1X10173102005
販売名：ペンタックス PRISMVUE NF5 医療機器届出番号：13B1X10173102009
販売名：ペンタックス USYFITVUE GP1 医療機器届出番号：13B1X10173102004

- 仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。予めご了承ください。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。

PENTAX

販売店

製造販売業者

HOYA Technosurgical株式会社 www.hoyatechnosurgical.co.jp

■ 本社 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-28-4 TEL:03-5369-1710 FAX:03-5369-1711
■ 札幌営業所 〒060-0007 札幌市中央区北七条西13-9-1 TEL:011-241-3473 FAX:011-241-3472
■ 仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-7-1 TEL:022-371-6944 FAX:022-371-8924
■ 名古屋営業所 〒461-0001 名古屋市東区泉1-21-27 TEL:052-955-8572 FAX:052-955-8573
■ 大阪営業所 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 TEL:06-6263-1679 FAX:06-6263-1686
■ 福岡営業所 〒810-0802 福岡市博多区中洲中島町3-8 TEL:092-281-6860 FAX:092-281-6869

