



Fibula Plate
Tibia Plate

HTS Suzy Ankle Plate System

Low Profile, Ease of use

ロープロファイルなプレートデザインと鏡面加工による足関節骨折治療に伴う軟部組織トラブルの軽減と、キャニュレイテッドロックングスクリューの採用による関節近傍の適切な位置へのスクリュー挿入の簡便さを追求した足関節プレートシステム

ロープロファイルを追求したデザイン

- 日本人の骨データを基に設計
- 薄さを追求したプレートデザイン
- スクリューヘッドの突出を抑制した形状
- 鏡面加工されたプレート表面
- 6mmからのスクリューラインナップ*
*一部オプション

遠位端厚
1.1mm



キャニュレイテッドロックングスクリュー

- 整復位を崩さずプレート越しにガイドピンによる仮固定を実現
- スクリュー挿入位置が確認できるため、関節近傍の適切な位置へのスクリュー挿入が可能
- 中実スクリューと同等の耐荷重強度



症例に応じた4つのプレートシステム

Fibulaプレートシステム

Fibula プレート ラテラル

Fibula プレート アンチグライド



最大6本の
スクリュー挿入

* 5, 6, 8穴のみ

近位をテーパードにする
ことで最小侵襲手術に対応

プレート形状を変更し適合
性を向上

ワッシャを組み合わせ
前方に最大30°の角度で
コーティカルスクリューの
挿入が可能

軟部組織の薄い部分に
対応したプレートデザイン

遠位端
プレート厚
1.1 mm

遠位端
プレート厚
1.45 mm

Tibiaプレートシステム

Tibia プレート メディアル

Tibia プレート アンテリア

ロープロファイルデザインは
脛骨遠位部での軟部組織へ
の影響を低減

キャニュレイトッドロックン
グスクリューの採用により
整復位を保持した状態で適
切な位置への挿入が可能

打ち上げのスクリューにより
固定を強化

Fibula プレート ラテラル

【厚さ】近位部: 2.0 mm 遠位部: 1.1 mm
 【幅】近位部: 9.0 mm 遠位部: 15.8 mm

製品番号	製品名	全長
ST-2710-003	Fibula プレート ラテラル 左 3穴	71 mm
ST-2710-004	Fibula プレート ラテラル 左 4穴	85 mm
ST-2710-005*	Fibula プレート ラテラル 左 5穴	99 mm
ST-2710-006*	Fibula プレート ラテラル 左 6穴	113 mm
ST-2710-008*	Fibula プレート ラテラル 左 8穴	141 mm
ST-2711-003	Fibula プレート ラテラル 右 3穴	71 mm
ST-2711-004	Fibula プレート ラテラル 右 4穴	85 mm
ST-2711-005*	Fibula プレート ラテラル 右 5穴	99 mm
ST-2711-006*	Fibula プレート ラテラル 右 6穴	113 mm
ST-2711-008*	Fibula プレート ラテラル 右 8穴	141 mm


*5,6,8穴は脛腓間固定ホールあり



Fibula プレート アンチグライド

【厚さ】近位部: 2.8 mm(3,4,5穴), 3.0 mm(6穴), 3.2 mm(8穴)
 遠位部: 1.45 mm
 【幅】近位部 / 遠位部: 9.0 mm

製品番号	製品名	全長
ST-2712-003	Fibula プレート アンチグライド 3穴	70 mm
ST-2712-004	Fibula プレート アンチグライド 4穴	84 mm
ST-2712-005	Fibula プレート アンチグライド 5穴	98 mm
ST-2712-006	Fibula プレート アンチグライド 6穴	112 mm
ST-2712-008	Fibula プレート アンチグライド 8穴	140 mm


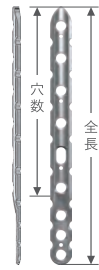


… オプション

Tibia プレート メディアル

【厚さ】近位部: 3.1 mm
 【幅】近位部: 10.9 mm 遠位部: 19.1 mm

製品番号	製品名	全長
ST-2814-003	Tibia プレート メディアル 左 3穴	97.5 mm
ST-2814-004	Tibia プレート メディアル 左 4穴	111.5 mm
ST-2814-006	Tibia プレート メディアル 左 6穴	139.5 mm
ST-2814-008	Tibia プレート メディアル 左 8穴	167.5 mm
ST-2814-010	Tibia プレート メディアル 左 10穴	195.5 mm
ST-2815-003	Tibia プレート メディアル 右 3穴	97.5 mm
ST-2815-004	Tibia プレート メディアル 右 4穴	111.5 mm
ST-2815-006	Tibia プレート メディアル 右 6穴	139.5 mm
ST-2815-008	Tibia プレート メディアル 右 8穴	167.5 mm
ST-2815-010	Tibia プレート メディアル 右 10穴	195.5 mm
ST-2816-003	Tibia プレート メディアル 左 アシスト 3穴	105.8 mm
ST-2816-004	Tibia プレート メディアル 左 アシスト 4穴	119.8 mm
ST-2816-006	Tibia プレート メディアル 左 アシスト 6穴	147.8 mm
ST-2816-008	Tibia プレート メディアル 左 アシスト 8穴	175.8 mm
ST-2816-010	Tibia プレート メディアル 左 アシスト 10穴	203.8 mm
ST-2817-003	Tibia プレート メディアル 右 アシスト 3穴	105.8 mm
ST-2817-004	Tibia プレート メディアル 右 アシスト 4穴	119.8 mm
ST-2817-006	Tibia プレート メディアル 右 アシスト 6穴	147.8 mm
ST-2817-008	Tibia プレート メディアル 右 アシスト 8穴	175.8 mm
ST-2817-010	Tibia プレート メディアル 右 アシスト 10穴	203.8 mm

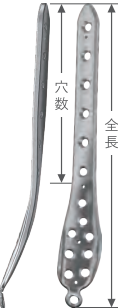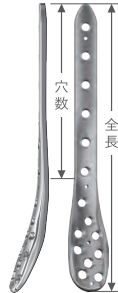


… オプション

Tibia プレート アンテリア

【厚さ】近位部: 1.8 mm 遠位部: 1.7 mm
 【幅】近位部: 9.5 mm 遠位部: 30.0 mm

製品番号	製品名	全長
ST-2810-003	Tibia プレート アンテリア 3穴	67.3 mm
ST-2810-004	Tibia プレート アンテリア 4穴	81.3 mm
ST-2810-006	Tibia プレート アンテリア 6穴	109.3 mm
ST-2811-003	Tibia プレート アンテリア アシスト 3穴	74.4 mm
ST-2811-004	Tibia プレート アンテリア アシスト 4穴	88.4 mm
ST-2811-006	Tibia プレート アンテリア アシスト 6穴	116.4 mm

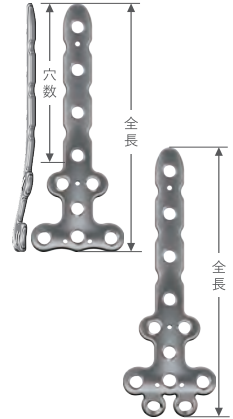

… オプション

ガイドピン

製品番号	製品名	全長
ST-LB000-00	φ1.4ガイドピン(トロッカー)	150 mm



ワッシャ

製品番号	製品名	外径
ST-2914-000	フラットワッシャ3.5	6.5 mm
ST-2915-000	カップワッシャ3.5	6.5 mm



… オプション

コーティカルスクリュー3.5



製品番号	スクリュー長	Fibula	Tibia
ST-2910-006	6 mm	オプション	オプション
ST-2910-008	8 mm	○	○
ST-2910-010	10 mm	○	○
ST-2910-012	12 mm	○	○
ST-2910-014	14 mm	○	○
ST-2910-016	16 mm	○	○
ST-2910-018	18 mm	○	○
ST-2910-020	20 mm	○	○
ST-2910-022	22 mm	○	○
ST-2910-024	24 mm	○	○
ST-2910-026	26 mm	○	○
ST-2910-028	28 mm	○	○
ST-2910-030	30 mm	○	○
ST-2910-032	32 mm	○	○
ST-2910-034	34 mm	○	○
ST-2910-036	36 mm	○	○
ST-2910-038	38 mm	○	○
ST-2910-040	40 mm	○	○
ST-2910-042	42 mm	○	○
ST-2910-044	44 mm	○	○
ST-2910-046	46 mm	○	○
ST-2910-048	48 mm	オプション	○
ST-2910-050	50 mm	○	○
ST-2910-052	52 mm	○	オプション
ST-2910-056	56 mm	○	○
ST-2910-060	60 mm	○	○

ロッキングスクリュー3.5



製品番号	スクリュー長	Fibula	Tibia
ST-2911-006	6 mm	○	オプション
ST-2911-008	8 mm	○	○
ST-2911-010	10 mm	○	○
ST-2911-012	12 mm	○	○
ST-2911-014	14 mm	○	○
ST-2911-016	16 mm	○	○
ST-2911-018	18 mm	○	○
ST-2911-020	20 mm	○	○
ST-2911-022	22 mm	○	○
ST-2911-024	24 mm	○	○
ST-2911-026	26 mm	○	○
ST-2911-028	28 mm	○	○
ST-2911-030	30 mm	○	○
ST-2911-032	32 mm	○	○
ST-2911-034	34 mm	○	○
ST-2911-036	36 mm	○	○
ST-2911-038	38 mm	オプション	○
ST-2911-040	40 mm	○	○
ST-2911-042	42 mm	○	○
ST-2911-044	44 mm	○	○
ST-2911-046	46 mm	○	○
ST-2911-048	48 mm	○	○
ST-2911-050	50 mm	○	○

キャニュレイトッドロッキングスクリュー3.5



製品番号	スクリュー長	Fibula	Tibia
ST-2912-006	6 mm	○	○
ST-2912-008	8 mm	○	○
ST-2912-010	10 mm	○	オプション
ST-2912-012	12 mm	○	○
ST-2912-014	14 mm	○	○
ST-2912-016	16 mm	○	○
ST-2912-018	18 mm	○	○
ST-2912-020	20 mm	○	○
ST-2912-022	22 mm	○	○
ST-2912-024	24 mm	○	○
ST-2912-026	26 mm	○	○
ST-2912-028	28 mm	オプション	○
ST-2912-030	30 mm	○	○
ST-2912-032	32 mm	○	○
ST-2912-034	34 mm	○	○
ST-2912-036	36 mm	○	○
ST-2912-038	38 mm	○	○
ST-2912-040	40 mm	○	○
ST-2912-042	42 mm	○	○
ST-2912-044	44 mm	○	○
ST-2912-046	46 mm	○	○
ST-2912-048	48 mm	○	○
ST-2912-050	50 mm	○	○

… オプション

販売名: HTS Suzy アンクルプレートシステム 医療機器承認番号: 30500BZX00214000
 販売名: HTS滅菌済ガイドピン 医療機器承認番号: 226AFBZX00147000

製造販売業者

HOYA Technosurgical株式会社

www.hoyatechnosurgical.co.jp

■本社	〒160-0004	東京都新宿区四谷4-28-4	TEL:03-5369-1710	FAX:03-5369-1711
■札幌営業所	〒060-0007	札幌市中央区北七条西13-9-1	TEL:011-241-3473	FAX:011-241-3472
■仙台営業所	〒981-3133	仙台市泉区泉中央1-7-1	TEL:022-371-6944	FAX:022-371-8924
■新潟営業所	〒950-0971	新潟市中央区近江2-20-44	TEL:025-288-0086	FAX:025-281-2066
■名古屋営業所	〒461-0001	名古屋市東区泉1-21-27	TEL:052-955-8572	FAX:052-955-8573
■大阪営業所	〒542-0081	大阪市中央区南船場1-17-9	TEL:06-6263-1679	FAX:06-6263-1686
■福岡営業所	〒810-0802	福岡市博多区中洲中島町3-8	TEL:092-281-6860	FAX:092-281-6869



HTS SuzyはHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

- 仕様、形状は一部変更することがあります。
- 電子添文をよく読んでから使用してください。